

Обслуживание станка A52

1. Проверка срока службы фрез

Частота: каждый день перед фрезеровкой
Метод проверки:

Сравните количество изготовленных реставраций с нормой замены (точное число зависит от партии фрез)

При возможности — очистите фрезу и проверьте износ под лупой

Ведите учет количества реставраций и меняйте фрезу своевременно

Возможные неисправности при нарушении:

Износ фрезы вызывает: сколы, слом фрезы, износ коронок, грубые линии на внутренней/внешней поверхности



2. Проверка регулятора давления воздуха

Частота: каждый день перед фрезеровкой

Что проверяется:

Есть ли жидкость в клапане регулировки давления воздуха

Соответствует ли давление требованиям

Шаги по обслуживанию:

Убедитесь, что давление воздуха в клапане достигает 0.5 МПа. Если давление ниже 0.45 МПа, фрезеровка будет остановлена.

Если в фильтре (колбе) есть вода:

Выключите компрессор

Откройте сливной клапан (вверх), чтобы слить воду

(Если вода появляется ежедневно в большом количестве — необходимо провести ТО компрессора или установить холодильный осушитель воздуха)

Возможные неисправности при нарушении:

Жидкость может попасть в зону фрезеровки и повлиять на результат, вызвать сбой

Недостаточное давление не позволит начать фрезеровку

Цифровой индикатор
давления



Сливной кран

3. Очистка камеры фрезеровки

Частота: каждый день после фрезеровки

Инструменты: пылесос, маленькая кисточка (использование воздушного пистолета запрещено!)

Шаги по обслуживанию:

Очистите пылесосом и кисточкой:

Шпиндель

Крепеж

Зону установки фрезы

Камеру фрезеровки

⚠ Не используйте воздушный пистолет — пыль может попасть на направляющие и винтовую передачу.

Сначала удалите осевшую пыль кисточкой, затем — пылесосом.


Возможные неисправности при нарушении:

Пыль в камере может попасть внутрь станка и повредить его


Пыль в держателе фрезы может вызвать заклинивание, сбой при замене инструмента

Пыль в шпинделе ускоряет его износ

Пыль в фиксаторах может вызвать срыв резьбы

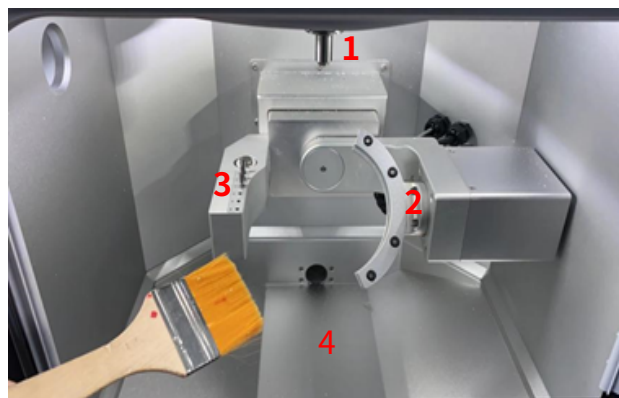

4. Калибровка станка

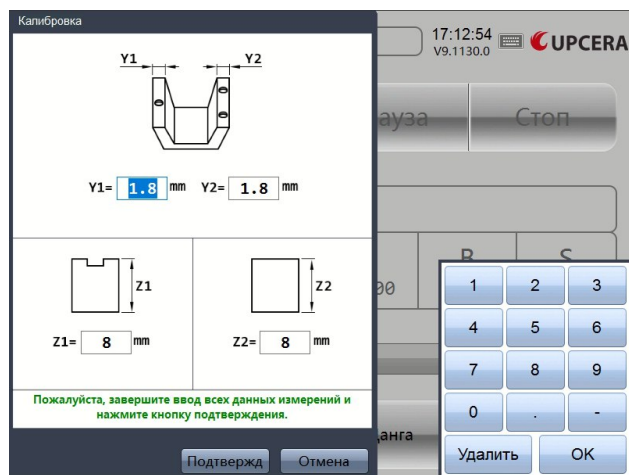

Периодичность: раз в месяц

Необходимые материалы: воск 98×12, штангенциркуль или микрометр

Шаги:

1. Установите воск и загрузите программу «A52 client calibration block», начните фрезеровку
2. Нажмите "Calibration" на главном экране
3. Измерьте калибровочный блок, введите результат и нажмите ОК
(только один раз! повторный ввод вызовет лишние коррекции)
4. Повторите калибровку и проверьте, укладывается ли результат в допуск




Допуски:

$Y1 = Y2 = 1.80 \text{ мм} \pm 0.04 \text{ мм}$

$Z1 = Z2 = 8.00 \text{ мм} \pm 0.02 \text{ мм}$

Возможные неисправности при нарушении:

Сколы, износ, или линии на внешней поверхности коронок

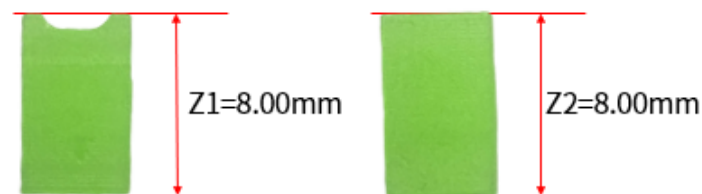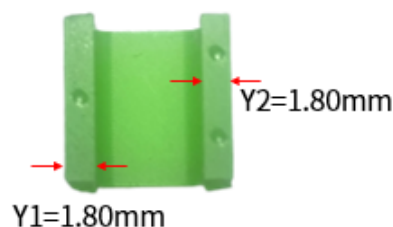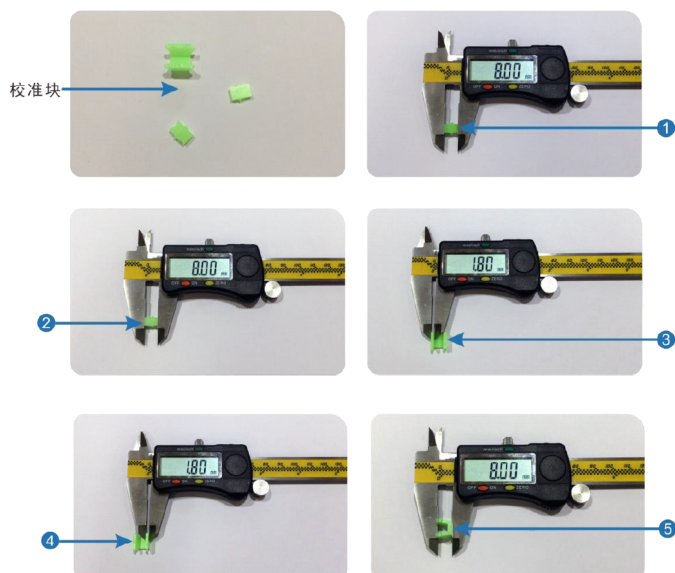

PS: Z1 has grooves at the top and Z2 is flat at the top

5. Обслуживание цанги

Периодичность: 1 раз в месяц

Инструменты: инструмент для съёма цанги, старая фреза, безворсовая салфетка

Шаги по обслуживанию:

1. Нажмите кнопку цанги в интерфейсе управления и откройте шпиндель
2. Установите инструмент для демонтажа, вставьте старую фрезу (чтобы избежать деформации при вращении)
3. Поверните по часовой стрелке для снятия цанги
4. Очистите цангу в спирте или паром, затем вытрите безворсовой салфеткой
5. После — установите цангу обратно, закручивая против часовой стрелки

Возможные неисправности при нарушении:

- Загрязнённая или неплотно зажатая цанга приводит к ухудшению качества фрезеровки
- Отсутствие регулярного ТО может привести к заклиниванию цанги и невозможности её снять

