

Выходя на мировую арену
и становясь лидером
в развитии мировой стоматологии.



 www.upcera.com
 sales@upcera.com

Follow us on:

 Upcera_Official
 upcera_official
 UPCERA
 Upcera



Facebook



Instagram



Youtube



LinkedIn

CE 0197

Date information prepared: 2025-01-09 / Rev.0

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Эксперт в области надежных материалов

UPCERA



Эксперт

в области надежных
материалов



СОДЕРЖАНИЕ

О компании UPCERA	Профиль компании	03
Семейство продуктов UPCERA AllCeramic	Цирконий для всех ваших нужд	05
	- HT White	13
	- ST Series	15
	- TT-ONE Series	20
	- TT Series	25
	- Explore Series	29
	- Ускоренная программа спекания	35
	Hyramic	37
	UP.CAD	39
	UP.Press	40
Стоматологические расходные материалы	Жидкости для окрашивания зубных протезов	41
	Realizm Glaze Paste	43
	ПММА	44
	Воск CAD/CAM	45
	Титановый сплав	47
	(Стоматологические) наборы для шлифовки и полировки	49
	Лабораторная насадка supraCXNStick	51
	Полировочная паста	52
	Абразивный материал измельченный корунд	53
	Шарики для синтеризации циркония	54
	Кисть из 100% меха норки	55
		57
	Цифровые решения для стоматологии	FLNTScan R1 - Интраоральный сканер
FLNTScan LU1 - Интраоральный сканер		65
A51 - 5-осевой фрезерный станок для сухой обработки		67
A52 - 5-осевой фрезерный станокдля сухой обработки		69
A52W - 5-осевой фрезерный станок для влажной обработки		71
A53 - 5-осевой фрезерный станок, оснащенный системой автоматической смены дисков		73
B42 - Фрезерный станок дляпредварительной обработки абатментов		74
B52 - фрезерный станок для винтовой фиксации мостовибалок		75
C41 - 4-осевой фрезерный станок для влажной обработки		76
D41 - Фрезерный станокдля титановых каркасов зубных протезов		77
GT1 - Печь для синтеризации циркония		78
C1 - Печь для высокоскоростной синтеризации		79
A7+ - Печь для обжига керамики		80
FLNTSaug-R-407-1 / FLNTSaug-R-412		82

Лучшие материалы для лучшей жизни

Компания Upsera занимается исследованиями и разработками, а также инновациями в области технологий материалов. Данные продукты предназначены, главным образом, для применения в стоматологических клиниках и лабораториях, предлагая целостные решения в области стоматологической керамики. В настоящее время деятельность компании охватывает 110 стран и регионов по всему миру, включая Азию, Северную Америку и Европу. Миссия компании заключается в предоставлении надежных и доступных решений в области реставрации зубов для стоматологов по всему миру.

10+ лет

исследованиями
посвящено
разработкам

25 стран

сертификации
продукта

120+

патентов
области
стоматологии

50+

зарегистрированных
сертификатов для
медицинских изделий

Обеспечение специалистов надежными и доступными решениями в области реставрации зубов.









Решения для специалистов в области стоматологии по всему миру.

Семейство продуктов All Ceramic

Для любых Ваших потребностей



Семейство продуктов UPCERA Zirconia

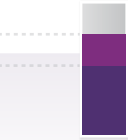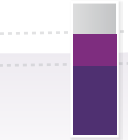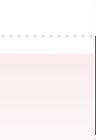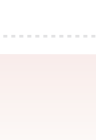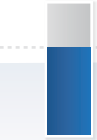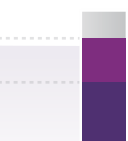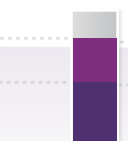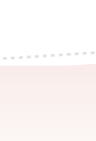 СЫРЬЕВОЙ МАТЕРИАЛ	EXPLORE HYBRID	EXPLORE FUNCTIONAL	EXPLORE ESTHETIC	TT WHITE	TT MULTILAYER	TT-ONE WHITE	TT-ONE PRE-SHADED	TT-ONE MULTILAYER	HT WHITE	ST WHITE	ST PRE-SHADED	ST MULTILAYER
	3Y-TZP & 4Y-PSZ	3Y-TZP & 4Y-PSZ	4Y-PSZ & 5Y-PSZ	5Y-PSZ	5Y-PSZ	4Y-PSZ	4Y-PSZ	4Y-PSZ	3Y-TZP-A	3Y-TZP	3Y-TZP	3Y-TZP
 ПРОЗРАЧНОСТЬ	 43% - 46.6%	 43% - 46.6%	 47% - 48.8%	 49%	 49%	 47%	 47%	 47%	 39%	 43%	 43%	 43%
 ПРОЧНОСТЬ*	 1027~1300 MPa	 1027~1300 MPa	 727~1000 MPa	 600 MPa	 600 MPa	 1000 MPa	 1000 MPa	 1000 MPa	 1300 MPa	 1300 MPa	 1300 MPa	 1300 MPa
 ОТТЕНКИ	A1 \ A2 \ A3 B1 \ B2 C1 \ C2 D2 \ BL3	A1 \ A2 \ A3 A3.5 \ A4 \ B1 B2 \ B3 \ B4 C1 \ C2 \ C3 \ C4 D2 \ D3 \ D4 \ BL1 BL2 \ BL3 \ BL4	A1 \ A2 \ A3 A3.5 \ A4 \ B1 B2 \ B3 \ B4 C1 \ C2 \ C3 C4 \ D2 \ D3 D4 \ BL1 \ BL2 BL3 \ BL4	Белый	A1 \ A2 \ A3 A3.5 \ A4 \ B1 B2 \ B3 \ B4 \ C1 C2 \ C3 \ C4 \ D2 D3 \ D4	Белый	A1 \ A2 \ A3 A3.5 \ A4 \ B1 B2 \ B3 \ B4 C1 \ C2 \ C3 C4 \ D2 \ D3 D4 \ BL1 \ BL2	A1 \ A2 \ A3 A3.5 \ A4 \ B1 B2 \ B3 \ B4 C1 \ C2 \ C3 C4 \ D2 \ D3 \ D4	Белый	Белый	A1 \ A2 \ A3 A3.5 \ A4 \ B1 B2 \ B3 \ B4 C1 \ C2 \ C3 \ C4 D2 \ D3 \ D4 OM1 \ OM2 \ OM3	A1 \ A2 \ A3 A3.5 \ A4 \ B1 B2 \ B3 \ B4 \ C1 \ C2 \ C3 \ C4 \ D2 \ D3 \ D4

*Результаты испытаний согласно ISO 6872

Руководство по использованию

Подходит для всех показаний





Показания	EXPLORE HYBRID	EXPLORE FUNCTIONAL	EXPLORE ESTHETIC	TT WHITE	TT MULTILAYER	TT-ONE WHITE	TT-ONE PRE-SHADED	TT-ONE MULTILAYER	HT WHITE	ST WHITE	ST PRE-SHADED	ST MULTILAYER
Вкладка, накладка, винир	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Внутренние структуры коронок на переднюю и заднюю группы зубов	√	√	√	★	√	★	★	√	★	★	★	★
Полностью анатомическая коронка на передние и задние зубы	√	★	★	√	★	√	√	★	√	√	√	√
Макс. 3-компонентные полностью анатомические мостовидные протезы для передних зубов (не более чем с одной промежуточной частью)*	√	√	★	√	★	√	√	√	√	√	√	√
Макс. 3-компонентные полностью анатомические мостовидные протезы для задних зубов (не более чем с одной промежуточной частью)*	√	★	★	√	★	√	√	★	√	√	√	★
Макс. 3-компонентные внутренние структуры (имеющие не более чем одну промежуточную часть)*	√	★	√	√	√	√	★	★	★	★	★	★
Полностью анатомические многокомпонентные мостовидные протезы (≥4-компонентов, имеющие не более двух последовательных промежуточных частей)*	√	★	×	×	×	√	√	★	√	√	√	√
Внутренние структуры для многокомпонентных мостовидных протезов (≥4-компонентов, имеющие не более двух последовательных промежуточных частей)*	√	★	×	×	×	★	★	★	★	★	★	★
Протезодного зуба с опорой на имплант	★	★	★	√	√	√	√	★	√	√	√	√
Фиксируемые полные зубные протезы с опорой на имплант (многокомпонентные)*	★	★	×	×	×	√	√	√	√	√	√	√

★ Настоятельно рекомендуется √ Доступны для применения по данному показанию × Применение не показано

* Основано на принципах конструирования несъемных зубных протезов.
Вследствие особенностей регуляторных требований, указанные показания могут отличаться от применимых в вашем регионе

Спецификации




Доступны все самые распространенные системы

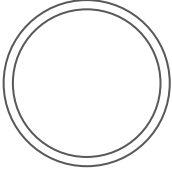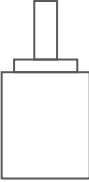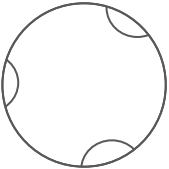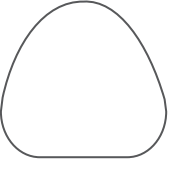Следующих систем	Спецификации (мм)	Упаковка	HT White	ST White	ST Pre-shaded	ST Multilayer	TT White	TT Multilayer	TT-ONE White	TT-ONE Pre-shaded	TT-ONE Multilayer	Explore Functional	Explore Esthetic	Explore Hybrid
 Open CAD/CAM System	D98x10(непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●		●		●	●				
	D98x12 (постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D98x14 (постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D98x16 (постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D98x18 (постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D98x20 (постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D98x22 (постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D98x25(постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D98x30(постепенный и непрерывный)	1 шт/кор.		●	●									●
 Cerec in lab (Sirona) System	20x14x15	12 шт/кор.	●	●	●									
	20x19x15	10 шт/кор.	●	●	●						●	●	●	
	40x14x15	8 шт/кор.	●	●	●									
	40x19x15	6 шт/кор.	●	●	●						●	●	●	
	55x19x15	5 шт/кор.	●	●	●						●	●	●	
	65x25x22	4 шт/кор.	●	●	●						●	●	●	
	85x40x22	2 шт/кор.	●	●	●									
 Zirkonzahn CAD/CAM System	D95x10	1 шт/кор.	●	●	●									
	D95x12	1 шт/кор.	●	●	●		●		●	●				
	D95x14	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D95x16	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D95x18	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D95x20	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D95x22	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	D95x25	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
 Amann Girrbach CAD/CAM System	89x71x10	1 шт/кор.	●	●	●									
	89x71x12	1 шт/кор.	●	●	●									
	89x71x14	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	89x71x16	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	89x71x18	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	89x71x20	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	89x71x22	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
	89x71x25	1 шт/кор.	●	●	●	●	●	●			●	●	●	

HT White

UPCERA HT White, изготовленный из материала 3Y-TZP, представляет собой высокопрозрачную циркониевую заготовку, которая используется для монокоронных или анатомически уменьшенных протезов на передние зубы и каркасов мостовидных протезов из керамики. Он предлагает лабораториям отличный выбор материалов высокой прочности.

- Идеально для слепочного трансфера и каркасов
- Ультравысокая прочность и более низкий риск разрушения

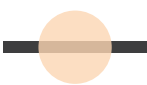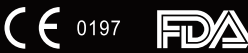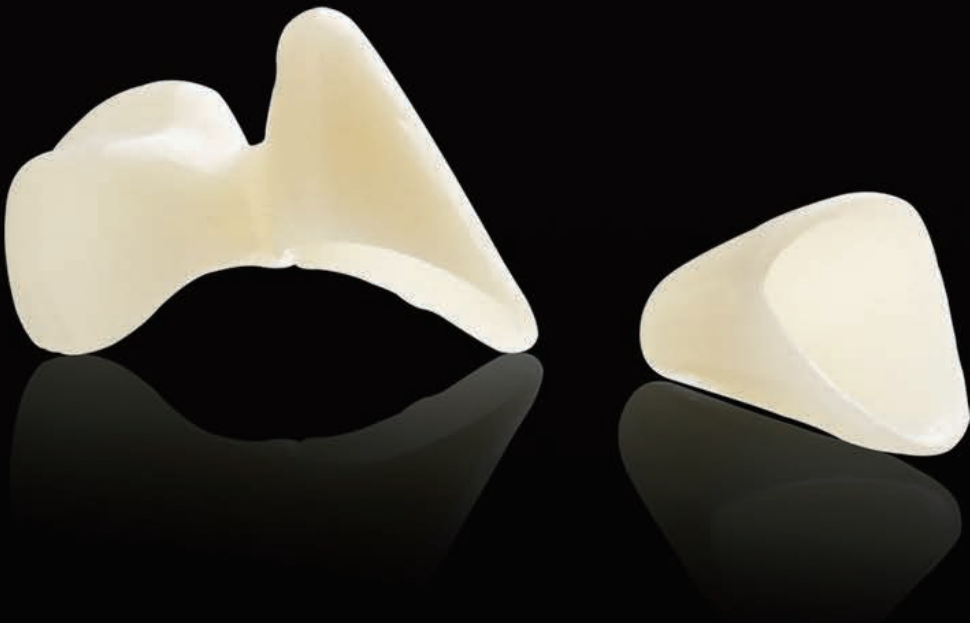

Прозрачность
39%



Прочность
1300 мПа

Физические характеристики


Плотность после синтеризации	>6.02g/cm ³
СТЕ* (25-500°C)	(10.5±0.5) x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Поверхность после ускоренного старения	<10%
Химическая растворимость после синтеризации	<100µg/cm ²
Радиоактивность	≤1.0Bq/g
Температура синтеризации	1530°C

*Линейное расширение при нагревании

Химический состав


ZrO ₂ + HfO ₂	94%-95%
Y ₂ O ₃	4.5%-6%
Al ₂ O ₃	<0.5%
Другие оксиды	<0.5%

Доступные системы

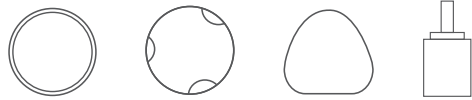


Open CAD/CAM System, Zirkonzahn CAD/CAM System, Amann Girrbach CAD/CAM System, Cerec in lab (Sirona) System

Программа синтеризации

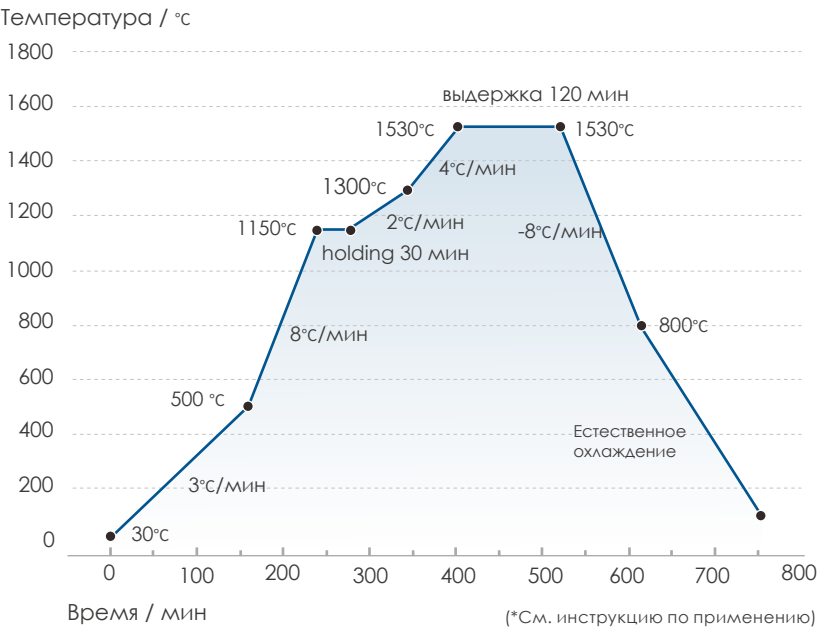

Эстетические реставрации начинаются с использования классического предварительно окрашенного циркония — UPCERA ST. В настоящее время существует множество различных вариантов, включая варианты белого цвета, предварительно окрашенные, а также многослойные. С прочностью на изгиб 1300МПа, ST является по-настоящему универсальным решением по типу «все в одном».

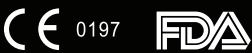

ST Series

- ▶ ST WHITE
- ▶ ST PRE-SHADED
- ▶ ST MULTILAYER



ST Series

Физические характеристики	ST White	ST Pre-shaded	ST Multilayer
Плотность после синтеризации	>6,02 г/см ³	>6,02 г/см ³	>6,02 г/см ³
СТЕ* (25-500°C)	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹
Содержание моноклинной фазы после ускоренного старения п поверхности	<15%	<15%	<15%
Химическая растворимость после синтеризации	<100 мкг/см ²	<100 мкг/см ²	<100 мкг/см ²
Радиоактивность	≤1,0 Бк/г	≤1,0 Бк/г	≤1,0 Бк/г
Температура синтеризации	1530°C	1530°C	1530°C
Химический состав			
Порошок циркония	-	>98%	>98%
Fe ₂ O ₃	-	<0,3%	<0,3%
Pr ₂ O ₃	-	<0,2%	<0,2%
Er ₂ O ₃	-	<1,0%	<1,0%
ZrO ₂ + HfO ₂	94%-95%	-	-
Y ₂ O ₃	4,5%-6%	-	-
Al ₂ O ₃	<0,5%	-	-
Другие оксиды	<0,5%	<1,2%	<1,2%

*Линейное расширение при нагревании

ST White


Методики индивидуальной инфильтрации и окрашивания ST White обеспечивают создание эстетических протезов. Подходит для применения по широкому спектру показаний.



ST Pre-shaded

Благодаря разнообразию оттенков, предварительно окрашенный цирконий ST может удовлетворить большую часть потребностей, связанных с проведением реставрации зубов. Оптимальная стабильность и выдающаяся система профилактики старения материалов делают его отличным выбором для зуботехнических лабораторий.



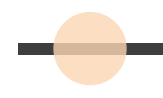

Прозрачность
43%




Прочность
1300 мПа

Доступные системы



Open CAD/CAM System, Zirkonzahn CAD/CAM System, Amann Girrbach CAD/CAM System, Cerec in lab (Sirona) System

Программа синтеризации

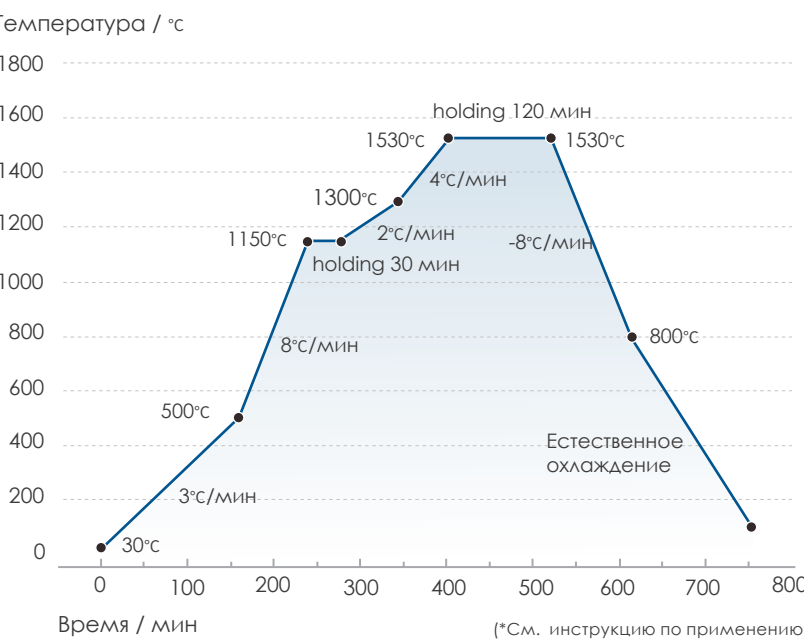



Прочность
1300 мПа

Доступные системы




Open CAD/CAM System, Zirkonzahn CAD/CAM System, Amann Girrbach CAD/CAM System, Cerec in lab (Sirona) System

Оттенки



Программа синтеризации

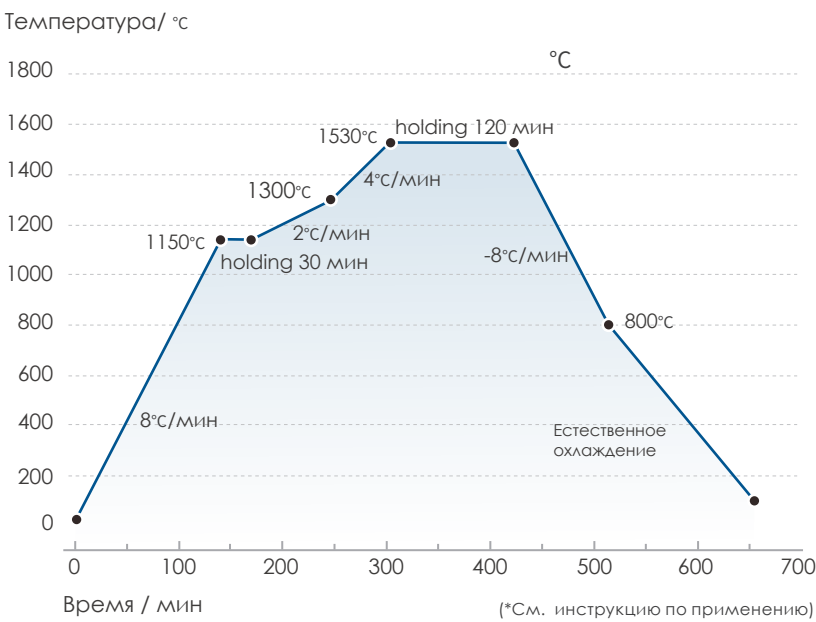


ST Multilayer

Предварительно окрашенный многослойный цирконий обеспечивает плавный градиент цветности при переходе от шейки к режущему краю, а также обладают высокой степенью обрабатываемости, что делает его материалом выбора для реставрации с использованием полноконтурных мостовидных протезов.



UPCERA TT-ONE - популярный во всем мире циркониевый материал, который идеально сочетает в себе высокую прочность и отличную прозрачность, что делает его подходящим для применения по всем показаниям.

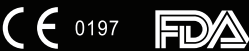


 Прочность
1300 МПа

Доступные системы




Open CAD/CAM System, Zirkonzahn CAD/CAM System, Amann Girrbach CAD/CAM System,

Оттенки

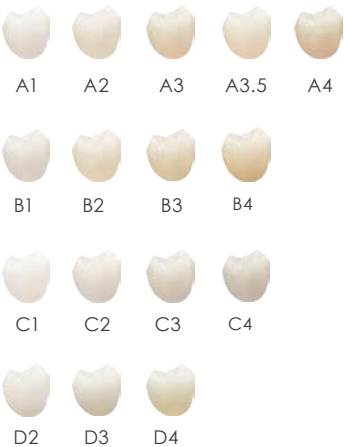

Программа синтеризации

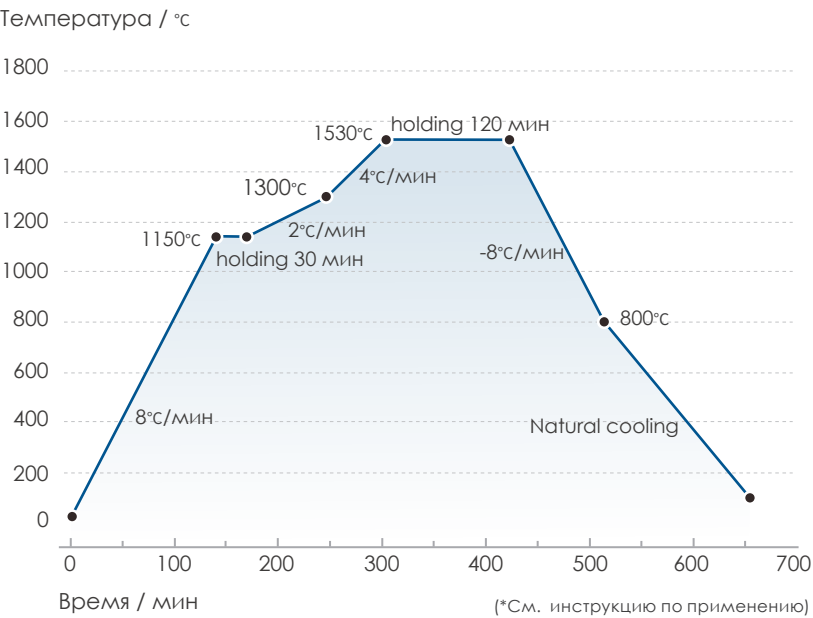

TT-ONE Series

- ▶ TT-ONE WHITE
- ▶ TT-ONE PRE-SHADED
- ▶ TT-ONE MULTILAYER





TT-ONE Series

Физические характеристики	TT-ONE White	TT-ONE Pre-shaded	TT-ONE Multilayer
Плотность после синтеризации	>6,0 г/см3	>6,0 г/см3	>6,0 г/см3
СТЕ* (25-500°C)	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹
Поверхность после ускоренного старения	<5%	<5%	<5%
Химическая растворимость после	<100 мкг/см2	<100 мкг/см2	<100 мкг/см2
Радиоактивность	≤1,0 Бк/г	≤1,0 Бк/г	≤1,0 Бк/г
Температура синтеризации	1480°C	1480°C	1450°C
Химический состав			
ZrO ₂ + HfO ₂	86,3%-94,2%	86,3%-94,2%	86,3%-94,2%
Y ₂ O ₃	5,8%-9,7%	5,8%-9,7%	5,8%-9,7%
Al ₂ O ₃	<0,5%	<0,5%	<0,5%
Fe ₂ O ₃	<0,5%	<0,5%	<0,5%
Er ₂ O ₃	<2,0%	<2,0%	<2,0%
Другие оксиды	<0,5%	<0,5%	<0,5%

*Линейное расширение при нагревании

TT-ONE White

TT-ONE White Сочетает в себе высокую прочность и отличную прозрачность при применении по всем показаниям.




Прозрачность
47%

Прочность
1000 мПа

Доступные системы

Open CAD/CAM System,
Zirkonzahn CAD/CAM System

Программа синтеризации

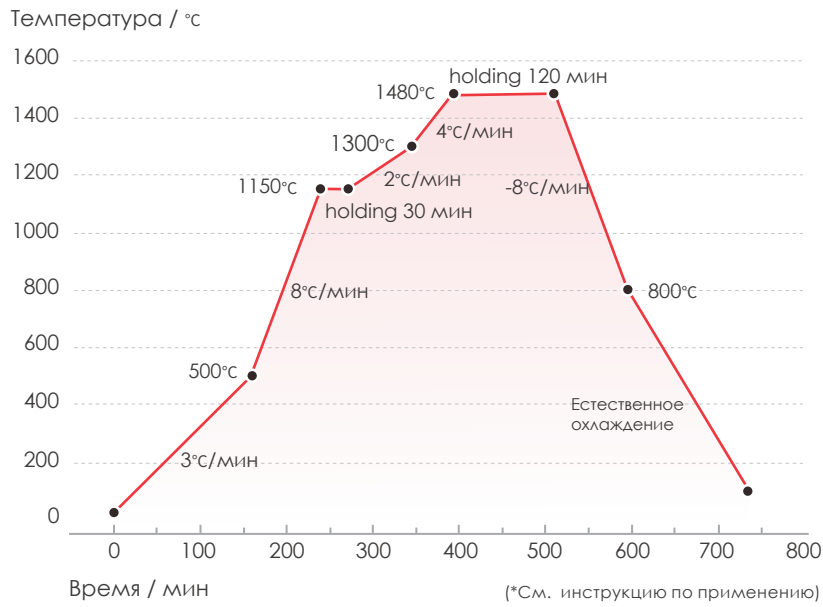

TT-ONE Pre-shaded

Предварительно окрашенный цирконий поставляется в 16 классических оттенках VITA и двух ярко-белых оттенках. Он прост в эксплуатации, обладает хорошей стабильностью и эффективностью.



TT-ONE Multilayer

Этот многослойный цирконий обладает высокой прочностью и отличные эстетические свойства без видимых линий, и доступен в 16 классических оттенках VITA.




Прочность
1000 мПа

Доступные системы

Open CAD/CAM System,
 Zirkonzahn CAD/CAM System

Программа синтеризации

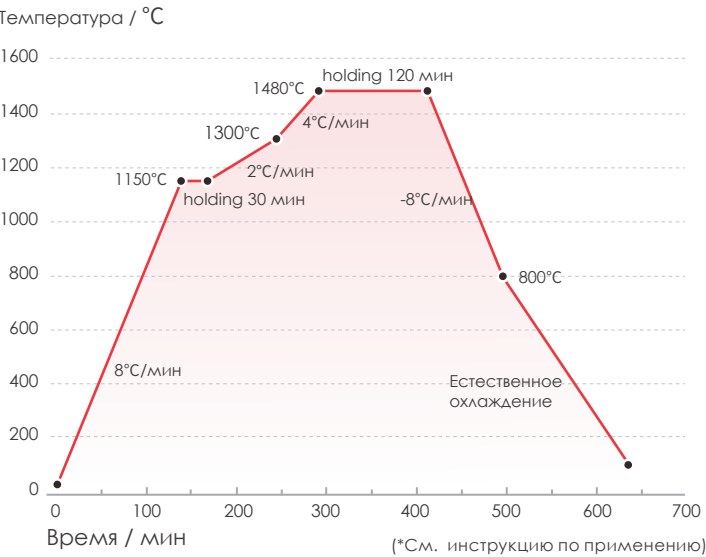


Оттенки

Прочность
1000 мПа

Доступные системы


Open CAD/CAM System, Zirkonzahn CAD/CAM System,
 Amann Girrbach CAD/CAM System, Cerec in lab (Sirona) System

Программа синтеризации

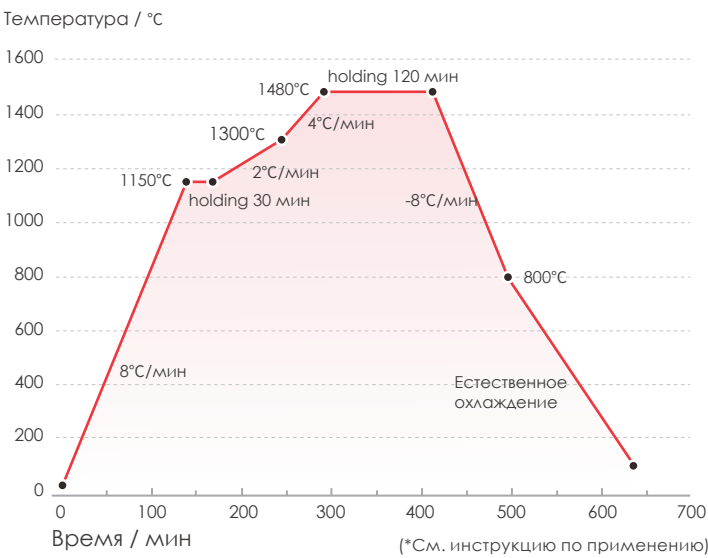

Оттенки

- Превосходная светопропускающая способность
- Нет необходимости в цельно-керамических винирах
- Для максимально естественных протезов на передние зубы
- Плавный переход цветов

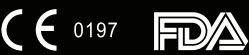

TT Series

- ▶ TT WHITE
- ▶ TT MULTILAYER



TT Series

Физические характеристики	TT White	TT Multilayer
Плотность после синтеризации	>6,0 г/см ³	>6,0g г/см ³
СТЕ* (25-500°C)	(10,5±0,5) x10 ⁻⁶ K ⁻¹	(10,5±0,5) x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Содержание моноклинной фазы после ускоренного старения поверхности	<5%	<5%
Химическая растворимость после синтеризации	<100 мкг/см ²	<100 мкг/см ²
Радиоактивность	≤1,0Bq/g	≤1,0Bq/g
Температура синтеризации	1450°C	1450°C
Химический состав		
ZrO ₂ + HfO ₂	86,3%-94,2%	86,3%-94,2%
Y ₂ O ₃	5,8%-9,7%	5,8%-9,7%
Al ₂ O ₃	<0,5%	<0,5%
Fe ₂ O ₃	<0,5%	<0,5%
Er ₂ O ₃	<2,0%	<2,0%
Другие оксиды	<0,5%	<0,5%

*Линейное расширение при нагревании

TT White

TT White обладает максимальной прозрачностью, что делает данный материал идеальным для реставрации передних и задних зубов (вплоть до единиц). В сочетании с методиками инфльтрации и окрашивания, обеспечивается достижение отличных эстетических результатов.



TT Multilayer

Цирконий TT multilayer обладает градиентом, является предварительно окрашенным и поставляется в 16 классических оттенках VITA. Он обладает превосходными эстетическими свойствами и не требует использования керамики.



Прозрачность
49%


Прочность
600 мПа

Доступные системы




Open CAD/CAM System,
Zirkonzahn CAD/CAM System,
Amann Girrbach CAD/CAM System,

Программа синтеризации

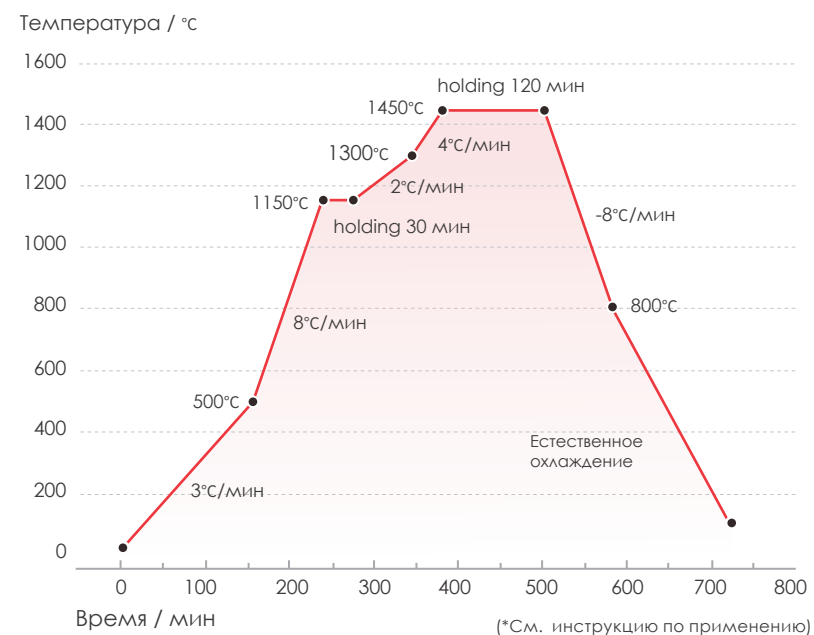


Прочность
600 мПа

Доступные системы

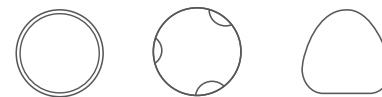


Open CAD/CAM System,
Zirkonzahn CAD/CAM System,
Amann Girrbach CAD/CAM System,


Программа синтеризации

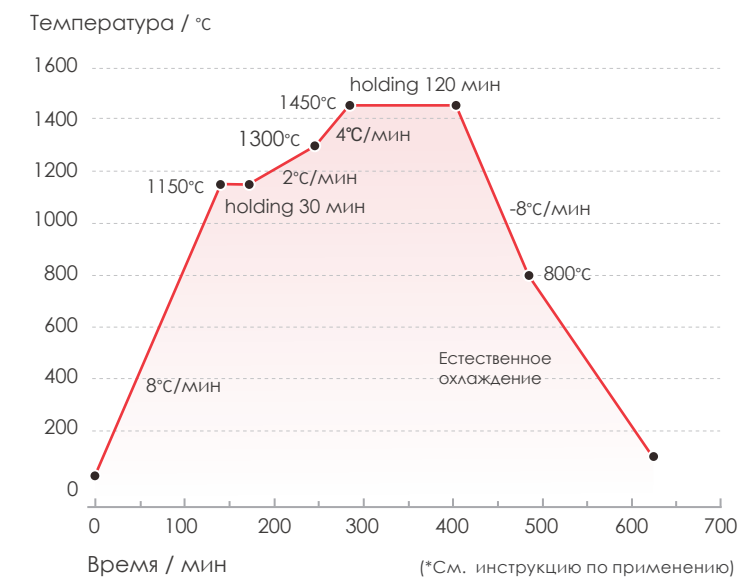

Оттенки

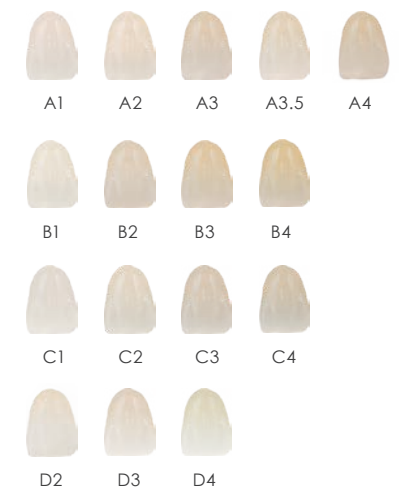

UPCERA Explore-это инновационный и революционный цирконий, который обеспечивает идеальный баланс между прочностью и прозрачностью. Благодаря своим функциональным и эстетическим свойствам, данный материал позволяет создавать зубные протезы с естественным внешним видом за меньшее время. Попробуйте материал Explore, чтобы усовершенствовать свой рабочий процесс и увеличить прибыль вашей лаборатории.

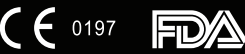

Explore Series

- EXPLORE FUNCTIONAL
- EXPLORE ESTHETIC
- EXPLORE HYBRID



Explore Series

Физические характеристики	Explore Hybrid	Explore Functional	Explore Esthetic
Плотность после синтеризации	≥6,0 г/см ³	≥6,0 г/см ³	≥6,0 г/см ³
СТЕ* (25-500°C)	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹	(10,5±0,5) ×10 ⁻⁶ К ⁻¹
Содержание моноклинной фазы после ускоренного старения поверхности	<5%	<5%	<5%
Химическая растворимость после синтеризации	<100 мкг/см ²	<100 мкг/см ²	<100 мкг/см ²
Радиоактивность	≤1,0 Бк/г	≤1,0 Бк/г	≤1,0 Бк/г
Температура синтеризации	1480°C	1480°C	1480°C
Химический состав			
ZrO ₂ + HfO ₂	86,3-94,2%	86,3-94,2%	86,3%-94,2%
Y ₂ O ₃	5,8%-9,7%	5,8%-9,7%	5,8%-9,7%
Al ₂ O ₃	<0,5%	<0,5%	<0,5%
Fe ₂ O ₃	<0,5%	<0,5%	<0,5%
Er ₂ O ₃	<2,0%	<2,0%	<2,0%
Другие оксиды	<0,5%	<0,5%	<0,5%

*Линейное расширение при нагревании

Explore Hybrid

Данный продукт гармонично сочетает в себе эстетику и функциональность, предлагая лабораториям простой и эффективный рабочий процесс. Данный материал позволяет одновременно восстанавливать мягкие и твердые ткани, достигая естественной «розово-белой» окраски.


Оптимальные показания

- Полная реставрация зубной дуги

Прочность




Прозрачность

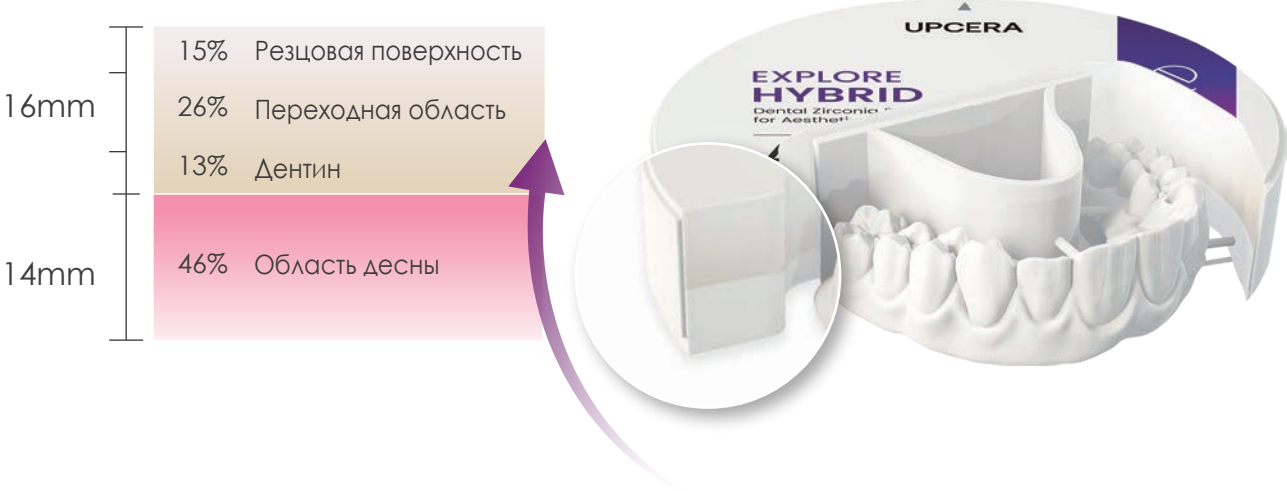

Оттенки



Программа синтеризации

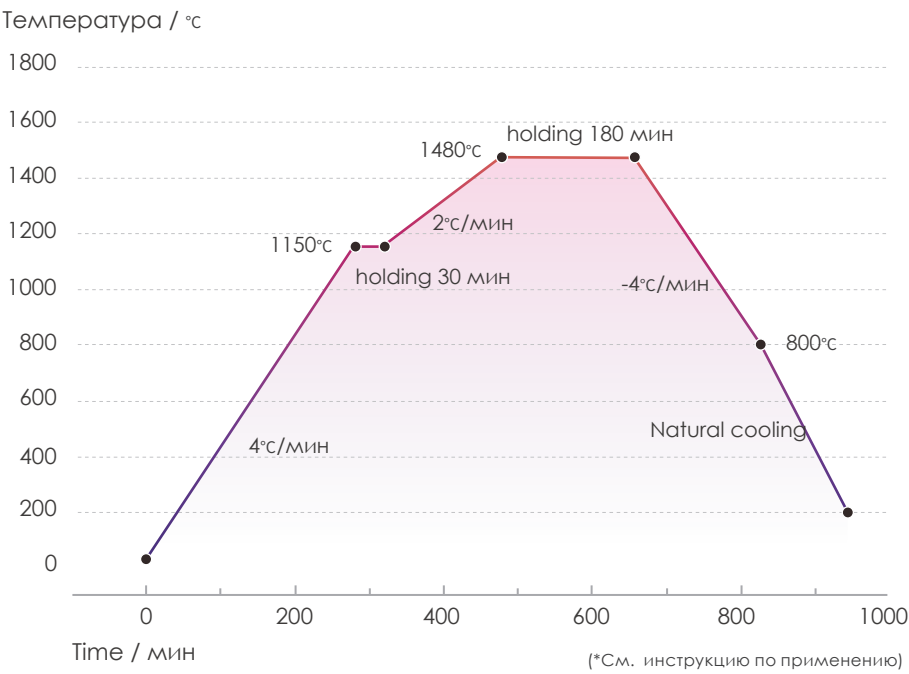

Explore Functional

Explore Functional - это вид циркония с градиентной прозрачностью и прочностью. Вследствие простоты манипуляций и естественных эстетических свойств, имитирующих зубы, данный материал представляет собой удачный выбор для выполнения реставрации задних зубов, а также для выполнения реставрации полного зубного ряда.




Explore Esthetic


Explore Esthetic - это вид многослойного циркония с градиентной прочностью. Его прозрачность выше, что он лучше подходит для реставрации передних зубов с более высокими эстетическими запросами.




Доступные системы

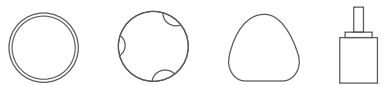

Open CAD/CAM System, Zirkonzahn CAD/CAM System, Amann Girrbach CAD/CAM System, Cerec in lab (Sirona) System

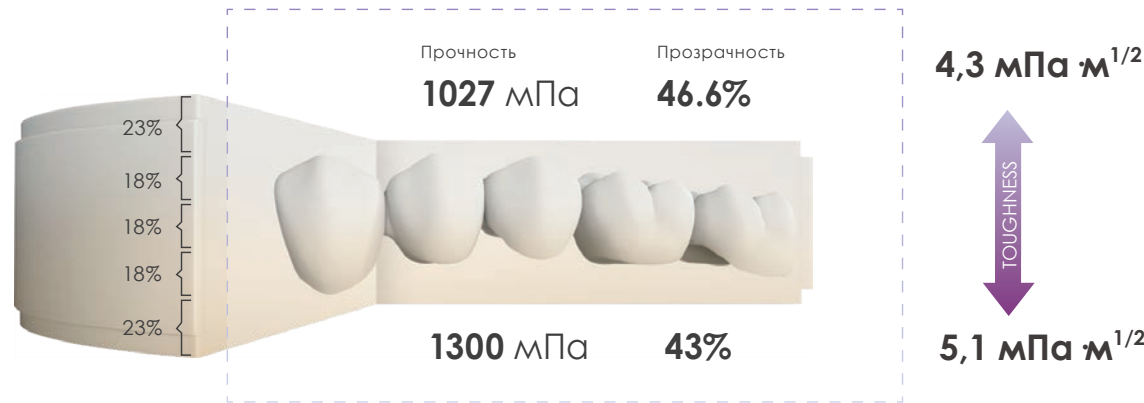

Доступные системы

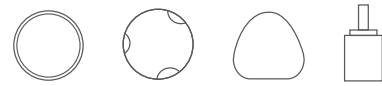


Open CAD/CAM System, Zirkonzahn CAD/CAM System, Amann Girrbach CAD/CAM System, Cerec in lab (Sirona) System



Оттенки




Программа синтеризации

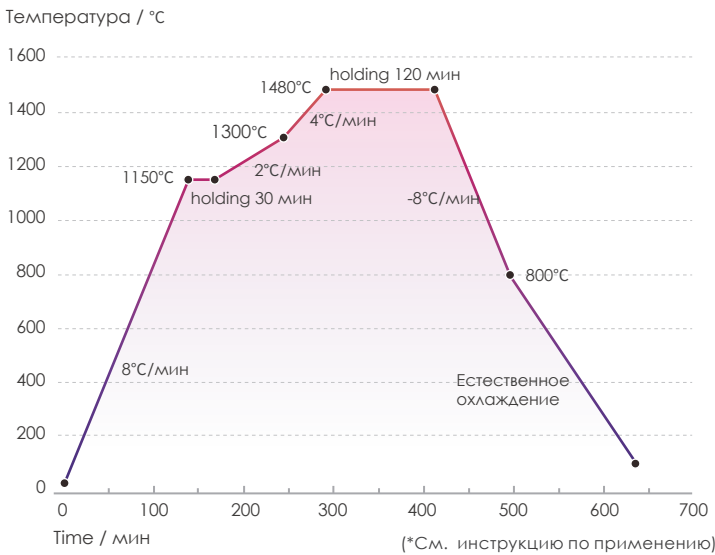

Оттенки



Программа синтеризации

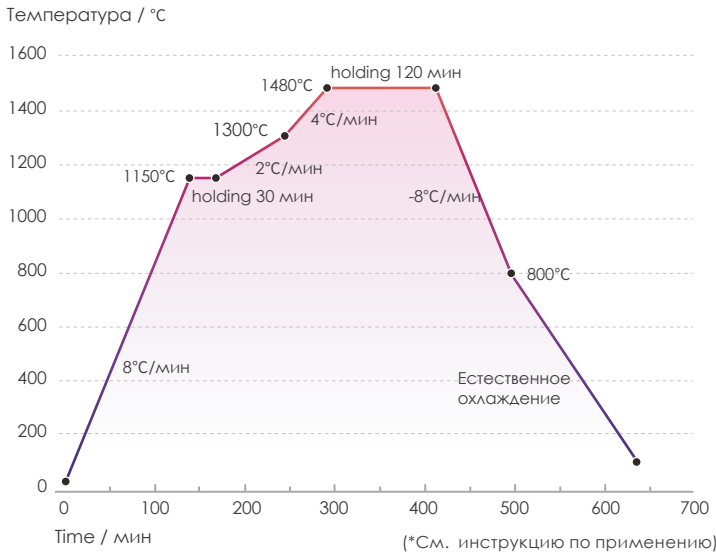


Программа высокоскоростной синтеризации

Макс.3 компонентные мостовидные протезы, имеющие не более одной промежуточной части



4 часовая программа высокоскоростной синтеризации


TT-One Preshaded, TT-One Multilayer, Explore Functional

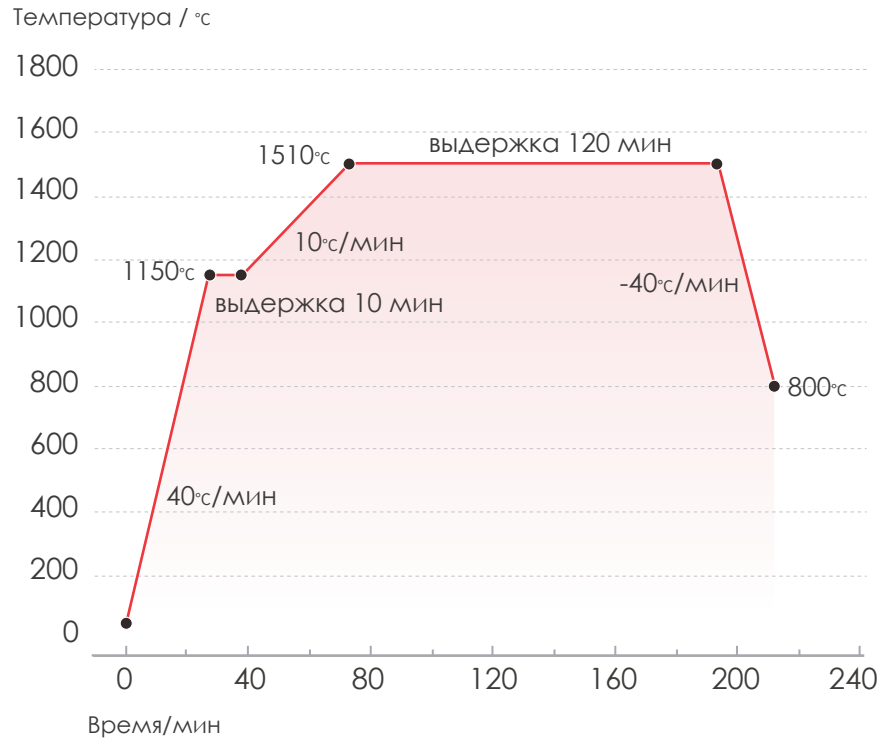

*Указанные температуры синтеризации являются рекомендательными. При необходимости проведите пробный цикл синтеризации и адаптируйте температуру синтеризации или ее продолжительность. Выберите подходящую вам высоко-температурную печь для синтеризации зубных протезов. Также обратитесь к инструкции по эксплуатации соответствующей печи для синтеризации.


4 часовая программа высокоскоростной синтеризации

ST Pre-shaded, ST Multilayer

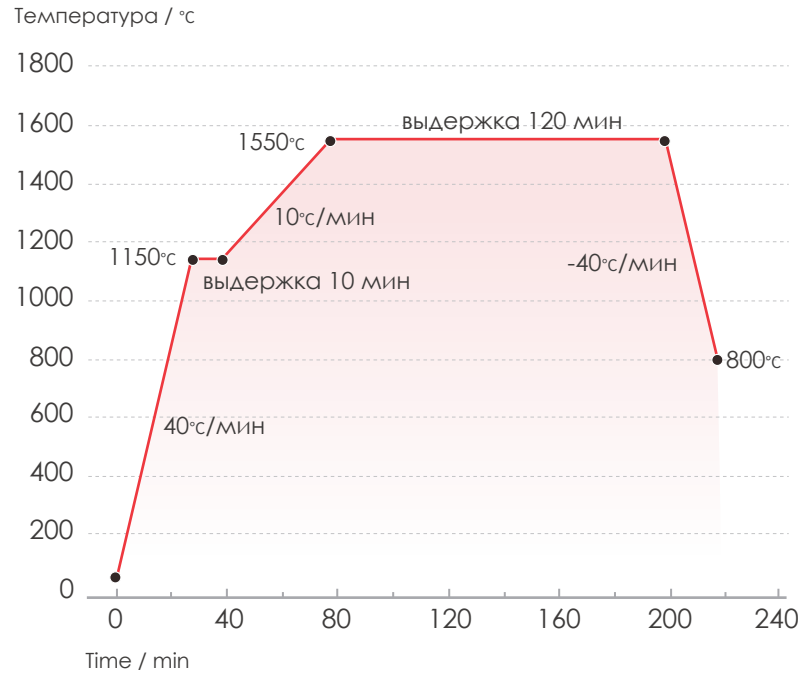

2 часовая программа высокоскоростной синтеризации

ST Pre-shaded, ST Multilayer, TT-One Preshaded, TT-One Multilayer, Explore Functional (without pontic)

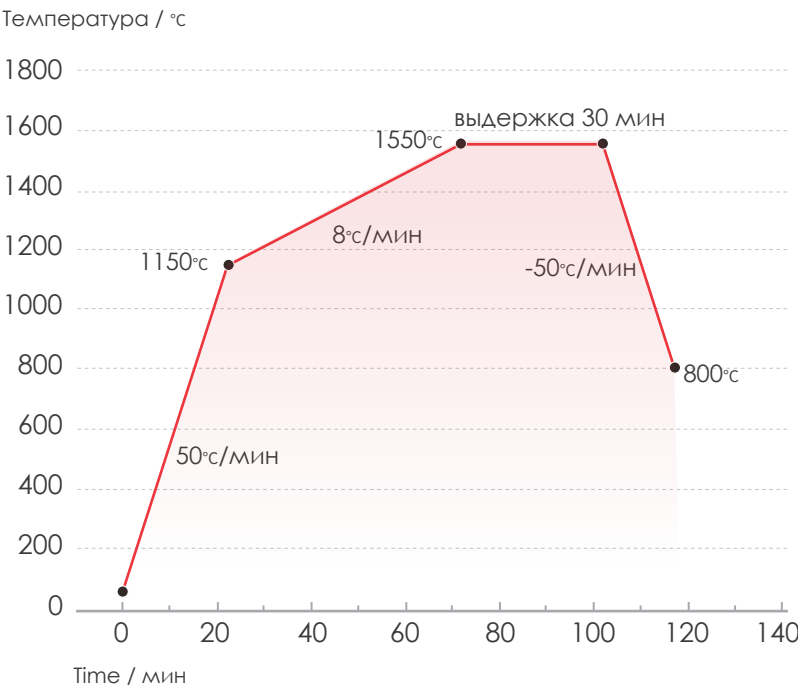


Hyramic

- Исключительная долговечность
Высокая прочность на изгиб и сжатие для обеспечения долговечности реставраций
 - Естественная гармония
Выдающиеся оттенки цвета, прозрачность и превосходная устойчивость для естественного внешнего вида
- Снятие напряжения
Зубоподобная эластичность снижает передачу напряжения для достижения более высокой производительности
 - Безупречная эффективность
Не требуется обжиг; точная фрезеровка, быстрая полировка и ремонтпригодность позволяют оптимизировать рабочий процесс при выполнении прямых реставраций



Химический состав	Полимеры на основе смолы	43%
	Неорганический фильтр	55%-85%
	Дополнительный	<1%
	Краситель	<1%
Технические характеристики	Поглощение воды	≤40 мкг/мм³
	Растворимость в воде	≤7,5 мкг/мм³


Показания

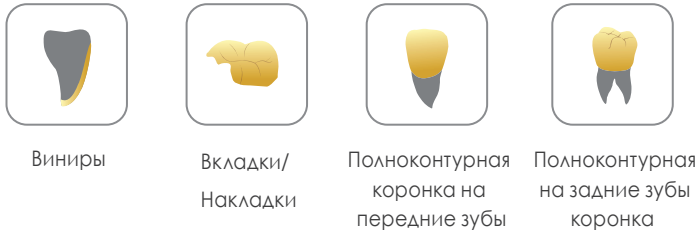

Доступные системы




Поставляется в виде одно-и многослойных оттенков

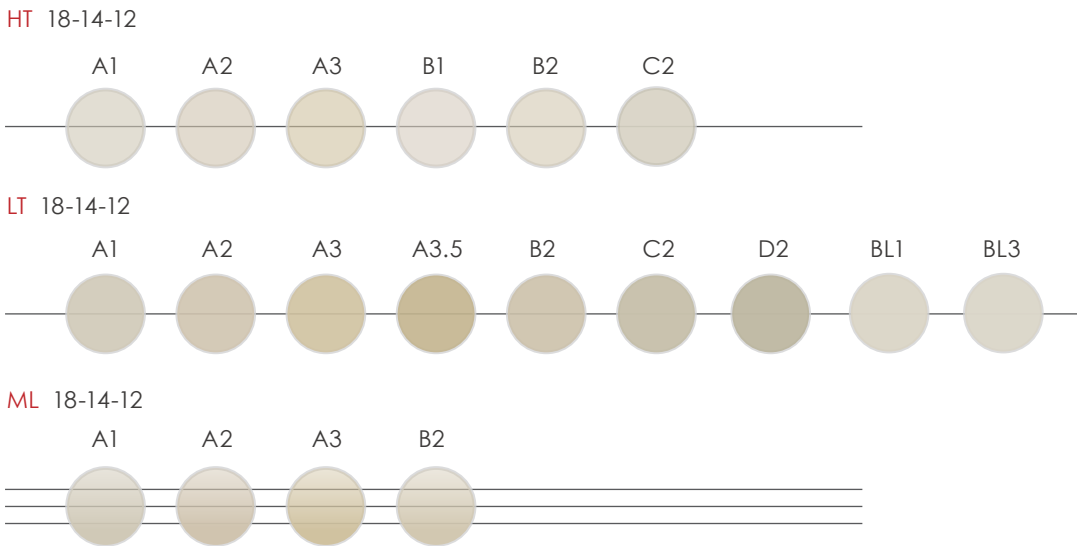

UP.CAD

- Потрясающие эстетические свойства со сверхвысокой прозрачностью и отличной механической прочностью
- Мгновенная прочность при выполнении прямой реставрации **400 мПа**

Показания

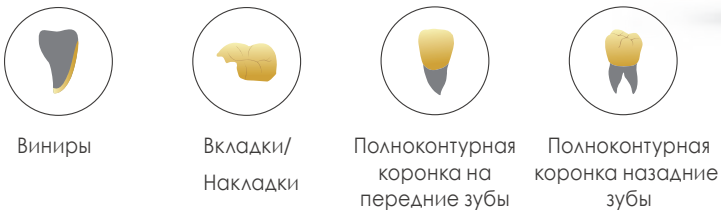

Физические характеристики	Плотность	2,4-2,7 г/см³
	СТЕ (25-500°C)	(10,5±0,5) x10 ⁻⁶ К ⁻¹
	Химическая растворимость после синтеризации	<100 мкг/см²
	Температура кристаллизации	840-850°C
Химический состав	SiO ₂	58,5%-72,5%
	Li ₂ O	13%-15%
	K ₂ O	3%-5%
	Другие оксиды	7,5%-25,5%

SPECIFICATION	SHADES
HT 18-15-13	A1 / A2 / A3 / A3.5 / B1 / B2 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4
LT 18-15-13	A1 / A2 / A3 / A3.5 / B1 / B2 / C1 / C2 / D2 / BL1 / BL2 / BL3 / BL4
HT 32-14-14	A1 / A2 / A3
LT 32-14-14	A1 / A2 / A3
HT40-15-15	A1 / A2 / A3 / B1
LT40-15-15	A1 / A2 / A3 / B1

UP.PRESS

Первый выбор для мини-инвазивных естественно выглядящих реставраций



	HT	LT	MO
Прозрачность			
Оттенки	A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 BL1 BL2 BL3 BL4	A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 BL1 BL2 BL3 BL4	MO1 MO2
Рекомендуемые показания	Тонкийвинир Винир Вкладка/накладка/ окклюзионный винир Частичная коронка	Винир Коронкана передние зубы Коронкана задние зубы Частичнаякоронка	Винир Коронкана передние зубы Коронкана задние зубы
Методика	Методика окрашивания	Методика окрашивания Методика резки	Методика послойного нанесения

Физические характеристики

Прочность	400мПа
Плотность	2,4-2,6 г/см³
СТЕ (25-500°C)	(10,5±0,5) x10 ⁻⁶ К ⁻¹
Твердость по Виккерсу	5400±400 мПа
Химическая растворимость после синтеризации	<100 мкг/см²

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Окрашивающие жидкости

- Совместимы со специальной жидкостью VITA
- Classic в 16 оттенках для идеальной индивидуализации.



Применение	Оттенки	Объем
Область дентина	16 оттенков (HT \ ST \ TT) A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4	50ML
Область ямки	O1 O2	50ML
Область резцовой поверхности	G1 G2	50ML
Область десны	P1 P2 P3	50ML
Видимая жидкость для окрашивания	Голубой Коричне-вый Фиолетовый Розовый	30ML
Растворитель	E0	50ML
Прозрачная жидкость для окрашивания	T0	50ML

Realism Glaze Paste

Набор, включающий натуральный краситель и пасту для зуботехнической глазури позволяет выбирать из широкого ассортимента цветов и идеально подходит для всех керамических зубных протезов. Удобное применение материала позволяет быстро выполнять окрашивание и глазурование с достижением естественного внешнего вида.

Оптимизировано для

- циркония и лития дисиликата



BASIC
BASE A BASE B BASE C BASE D

INCISAL
BASE 0 GREY GREY BLACK BLUE BLUE GREY

FOSSA
ORANGE BROWN REDDISH BROWN

EFFECT
BLACK WHITE YELLOW PURPLE OLIVE YELLOW OLIVE GREEN

GINGIVAL
PINK DARK PINK

GLAZE
GLAZE GLAZE FLUO



Спецификации

Набор, включающий краситель и зуботехническую глазурь

обеспечивает лучшие эстетические свойства при всехвариантах цветов



BASE A BASE 0 BLUE GREY BLACK WHITE GLAZE

BASE B GREY ORANGE YELLOW PURPLE GLAZE FLUO

BASE C GREY BLACK BROWN OLIVE YELLOW OLIVE GREEN

BASE D BLUE REDDISH BROWN PINK DARK PINK GLAZE LIQUID

Базовый набор, включающий красители пасту для глазури

позволяет восполнить основные потребности за счет7 цветов



BASE A BASE B PINK

GREY BLUE OLIVE GREEN GLAZE GLAZE LIQUID

Программа обжига

Для мостовидных протезов, имеющих не более трех компонентов, или коронок

Исходная температур (°C)	Время предварительного (мин)	Время сушки (мин)	Скорость нагревания (°C/мин)	Обжиг температур (°C)	Выдержка предварительного (мин)	Скорость охлаждения (°C/мин)	температур при открытии (°C)
500	4:00	4:00	45	760-830	1:00	45	500

For more than three units bridges

Исходная температур (°C)	Время предварительного (мин)	Время сушки (мин)	Скорость нагревания (°C/мин)	Обжиг температур (°C)	Выдержка предварительного (мин)	Скорость охлаждения (°C/мин)	температур при открытии (°C)
400	4:00	4:00	30	760-830	1:00	30	400

- Примечания:
- Указанные выше параметры обжига являются лишь рекомендательными и поэтому их всегда необходимо адаптировать в зависимости от пещииее соответствующей функциональности. Наиболее важно добиться правильного результата обжига.
 - Пожалуйста, также учитывайте параметры обжига в соответствии с рекомендациями производителя материалов внутренних структур.
 - Такжеобратите внимание, что результаты обжига зависят от таких параметров, какмодель, эксплуатационные характеристики, а также срок службы используемой пути. Таким образом, калибровка температуры печи может не понадобится.
 - Если несколько протезов (например, многокомпонентных мостовидных протезов с крупными промежуточными частями или нескольких полноконтурных протезов) обжигают за один цикл, нагревание обрабатываемых объектов можетзанимать больше времени.
 - Скорости нагревания иохлаждения зависят от числа единиц зубных протезов. Чем больше единиц зубных протезов подвергаются обработке, тем ниже будут скорости нагрева и охлаждения.
 - При многократном обжиге окончательная температура может быть снижена на 10°C в зависимости от степени блеска.


РММА

- Отличная устойчивость к истиранию и деформации
- Поставляется в однотонном и многоцветном вариантах



Технические характеристики	Прочность на изгиб	≥100 МПа
	Показатель абсорбции воды	≤40µg/cm³
	Количество вещества, перешедшего в раствор	≤7.5µg/cm³
Химический состав	Methacrylic acid polymer	≈99%
	Pigment	≤1%

Спецификации	Временный Протез	S (Monochrome)	A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 A0 BL1 BL2 BL3
		M (Multilayer)	A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 A0 BL1 BL2 BL3
	Базис зубных протезов-материал из смолы		V-Розовый А, V-Розовый В, V- Розовый С
	Полный съемный зубной протез		A1/V-Розовый А, A2/V-Розовый А, A3/V-Розовый А, A3.5/V-Розовый А, A4/V-Розовый А, A1/V-Розовый В, A2/V-Розовый В, A3/V-Розовый В, A3.5/V-Розовый В, A4/V-Розовый В, A1/V-Розовый С, A2/V-Розовый С, A3/V-Розовый С, A3.5/V-Розовый С, A4/V-Розовый С, B1/V-Розовый А, B1/V-Розовый В, B1/V-Розовый С
	Прозрачный цвет		—

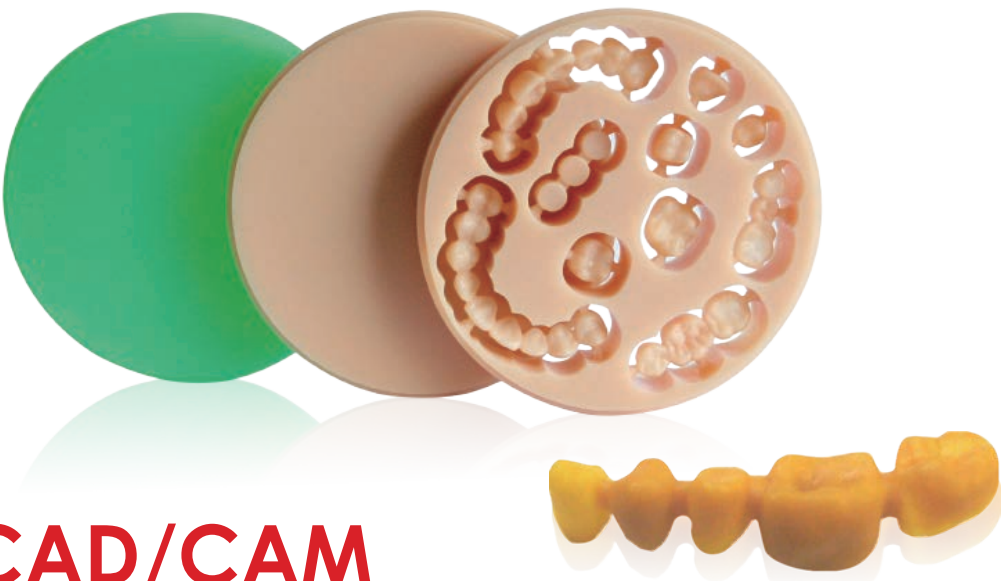

Воск CAD/CAM

- Сгорает без остатка
- Легкая фрезеровка без деформации

Технические характеристики	Точка плавления	110-115С
	Твердость	45-55°
	Коэффициент расширения при нагревании	5%
Химический состав	Полиэтиленовый воск	12.7%
	Синтетический воск	85%
	Другие	2.3%


Спецификации	Универсального типа	Флуоресцентный зеленый, голубой, белый, черно-серый, бежевый
	Эстетический воск	Белый, А2, А3 идругие распространенные цвета
	Рекомендовано Параметры фрезерования	Скоростьшпинделя: 18000 об/мин Нагрузка на фрезу при черновой: 0,2mm обработке: Установка фрезы 0,2 мм для тонкой обработки: 0,05 мм

(Стоматологический) ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ

Высоко-производительная заготовка из титана Grade 5 в соответствии классу BT6с, специально разработанная для применения с CAD-CAM системами



- Изготовлено из титанового сплава Grade 5 TiAl6V4.
- Исключительные свойства благодаря соединению золота и керамики. Уникальная резистентность к коррозии.
- Превосходная биосовместимость.
- Особенно удобен для пациентов благодаря низкой теплопроводности.
- Идеально подходит для реставраций на имплантах, с использованием супраструктур, штифтов, абатментов, коронок и мостовидных протезов.

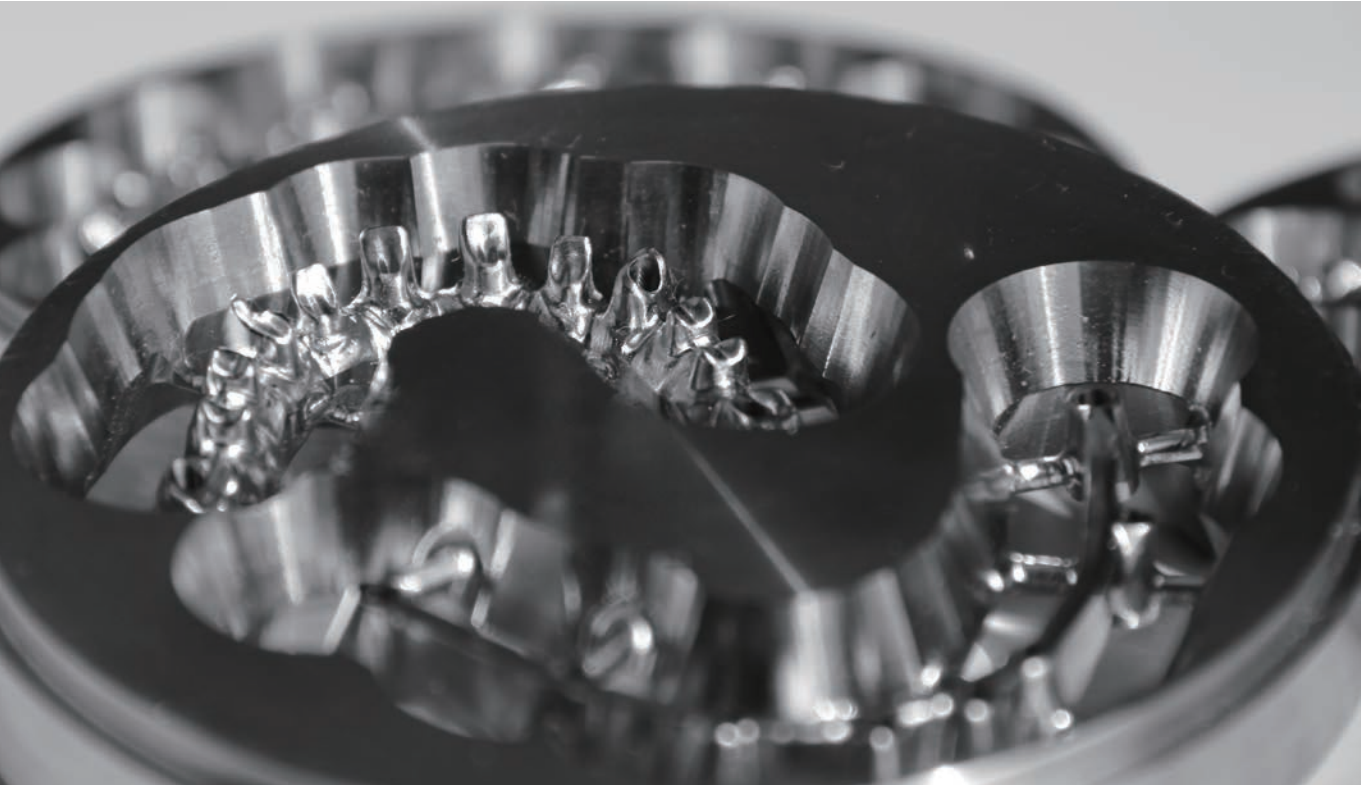

Показания



Химический состав

Ti%	Al%	V%	Fe%	O%	C%	N%	H%
Balance	5,5 - 6,8	3,5 – 4,5	≤0,3	≤0,2	≤0,08	≤0,05	≤0,01

Технические характеристики

0,2%-относительноеудлинение при разрыве Rp0,2/МПа	860 МПа	Макс. Температура обжига	макс. 950 °С
Модуль Юнга	110 ГПа	КТР	10×10 ⁻⁶ К ⁻¹
Удлинение при разрыве	8%	Твердость	295HV10
Температура отливки	1700°С	Устойчивость к выцветанию	Да
Температура плавления	1640-1670°С	Устойчивость к коррозии	≤200 мкг/см ²
Плотность	4,4 кг/см ³	Прочность на разрыв	885 МПа

Модель



D98X10 D98X12 D98X14 D98X16
D98X18 D98X20 D98X25

Комплекты для шлифования и полировки

Применимо для циркониевых и фарфоровых изделий



Алмазные зуботехнические фрезы для циркония

Материал: Смесь алмазных зерен и керамическим порошком.

Применение: Для быстрой подготовки зубных протезов из циркония используется сухая шлифовка без водного охлаждения (это эффективный и быстрый способ подготовки без применения алмазных боров с водным охлаждением)

Меры предосторожности: Пожалуйста, работайте с продукцией только в диапазоне допустимых значений об/мин, чтобы не допустить ее повреждения

Зернистость: средне-крупная Упаковка(шт):1 Заказ №.: Рекомендуемая скорость, об/мин: Размер D x L (мм): ISO No.: 805...							
	CD 001 3	CD 006 3	CD 008 3	CD 007 3	CD 009 3	CD 011 3	CD 012 3
	15,000-30,000 / min	15,000-30,000 / min	15,000-30,000 / min	15,000-30,000 / min	15,000-30,000 / min	15,000-30,000 / min	15,000-30,000 / min
	13 x 7	16 x 2	22 x 2	16 x 3.5	22 x 4.5	16 x 1.5	22 x 2
	900 030 524 130	900 372 524 160	900 372 524 220	900 041 524 160	900 041 524 220	900 307 524 130	900 307 524 220

Зернистость: средне-крупная Упаковка(шт):1 Заказ №.: Рекомендуемая скорость, об/мин: Размер D x L (мм): ISO No.: 805...							
	CD 201 3	CD 202 3	CD 203 3	CD 212 3	CD 214 3	CD 221 3	CD 222 3
	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min
	3 x 7	5 x 12	7 x 12	4 x 10.5	3 x 7	5 x 2.5	13 x 3.5
	104 110 524 030	104 113 524 050	104 113 524 070	104 174 524 040	104 197 524 030	104 014 524 050	104 024 524 130

Зернистость: средне-крупная Упаковка(шт):1 Заказ №.: Рекомендуемая скорость, об/мин: Размер D x L (мм): ISO No.: 805...					
	CD 224 3	CD 225 3	CD 231 3	CD 232 3	CD 251 3
	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min
	3.6 x 7	6 x 8	12 x 2	12 x 3	3 x 3
	104 237 524 036	104 030 524 060	104 041 524 120	104 042 524 120	104 001 524 030

Упаковка(шт):1 Заказ №.: Рекомендуемая скорость, об/мин: Размер D x L (мм): ISO No.: 805...				
	CD 232 4	CD 202 4	CD 212 4	CD 214 4
	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min	20,000-35,000 / min
	12 x 3	5 x 12	4 x 10.5	3 x 7
	104 042 514 120	104 113 514 050	104 174 514 040	104 174 514 030

Резиновые алмазные полиры, специально разработанные для циркония/ фарфора

Материал: Смесь алмазных зерен и синтетического каучука.

Применение: Для очень быстрого сглаживания и блестящей полировки внутренней поверхности циркониевых коронок, циркониевых или фарфоровых виниров. (Позволяет избежать различий в цвете и хрупкости фарфора, обусловленных повторным нанесением глазури и обжигом. И это также может помочь сэкономить время

Меры предосторожности: Пожалуйста, работайте с продукцией только в диапазоне допустимых значений об/мин, чтобы не допустить ее повреждения

Зерно:	Extra Coarse	Mid-Coarse	Fine	Extra Fine	Ultra Fine
Упаковка (шт):1					
Заказ №.:	RD 011 1	RD 011 3	RD 011 4	RD 011 5	RD 011 6
Рекомендуемая скорость, об/мин:	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	10,000-20,000 / min	10,000-20,000 / min
Size Ф × L(mm):	19 x 2	19 x 2	19 x 2	19 x 2	19 x 2
ISO No.: 802...	900 307 544 190	900 307 524 190	900 307 514 190	900 307 504 190	900 307 494 190

Зерно:	Extra Coarse	Mid-Coarse	Fine	Extra Fine	Ultra Fine
Упаковка (шт):1					
Заказ №.:	RD 012 1	RD 012 3	RD 012 4	RD 012 5	RD 012 6
Рекомендуемая скорость, об/мин:	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	10,000-20,000 / min	10,000-20,000 / min
Размер D ×L (мм):	26 x 3	26 x 3	26 x 3	26 x 3	26 x 3
ISO No.: 802...	900 307 544 260	900 307 524 260	900 307 514 260	900 307 504 260	900 307 494 260

Зерно: средней плотности							
Упаковка (шт):1							
Заказ №.:	RD 201 3	RD 202 3	RD 211 3	RD 212 3	RD 216 3	RD 221 3	RD 222 3
Рекомендуемая скорость, об/мин:	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min
Размер D ×L (мм):	3 x 7	5 x 12	3 x 7	4 x 12	4 x 12	9 x 8.5	18 x 3
ISO No.: 802...	104 110 524 030	104 113 524 050	104 243 524 030	104 243 524 040	104 174 524 040	104 030 524 090	104 026 524 180

Зерно: средней плотность					
Упаковка (шт):1					
Order No.:	RD 231 3	RD 232 3	RD 233 3	RD 241 3	RD 237 3A
Рекомендуемая скорость, об/мин:	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min	15,000-25,000 / min
Размер D ×L (мм):	12 x 1	12 x 2	12 x 4	12 x 2	15×2.5
ISO No.: 802...	104 371 524 120	104 041 524 120	104 042 524 120	104 304 524 120	104 041 524 150

Лабораторный микромотор

Инновационный дизайн для более благоприятного опыта

Используется для обрезки отделения зуботехнического циркония, стекло керамики, композитных материалов, а также материалов из титана и металлических сплавов. Применяется высококачественный бесщеточный мотор производства Тайвань на основе передовых технологий, за счет чего уменьшаются вибрации, что позволяет повысить комфорт пользователя.



Превосходное управление скоростью крутящего момента



Активная интеллектуальная система безопасности



Оптимально для высококлассных зуботехнических лабораторий

Модель	W-50H
Размер кожуха	220 × 160 × 80 мм (длина × ширина × высота)
Масса кожуха	2,6kg (массанетто)
Размер насадки	148 × 27 мм (длина × ширина)
Масса насадки	230 г(масса нетто)
Выходная мощность	150 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	<1 Вт
Максимальный крутящий момент	9,8 Нсм
Установки скорости	0~50,000 об/мин
Флуктуации скорости	<1% от установленной скорости
Источник питания	250VAC/3A
Режим работы	Переключатель / вперед и назад
Автоматическая диагностика неисправностей	E0-E7 дисплей
Защитаконтура	Перегрев. Перегрузка. Токовая перегрузка
Динамический ответ	Запускается за 1,1 секунды / останавливается за 1,2 секунды
Режим привода	ручной режим / педаль управления скоростью

supraCXN Stick

Аппликатор с адгезивным наконечником

- Гибкий наконечник, который легко сгибается
- Выраженная сила склеивания
- Обеспечивает надежную фиксацию до установки зубного протеза
- Отсоединяется простым поворотом
- На поверхности прикрепления не остается следов



Упаковка: 10 шт в наборе, 2 наборов/кор.


Применение

supraCXN Stick предназначен для удержания и размещения хрупких компонентов, используемых в стоматологии.

Идеально для работы с винирами, вкладками, накладками, коронками креплениями, брекетами, стоматологическими украшениями и др.



Для чего это может применяться в ходе стоматологического лечения?

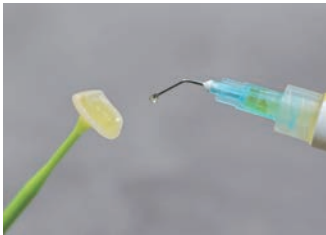

Протравливание



Силанизация



Цементирование



Установка

FLNT Shine ZrO₂

Полировальная паста

Экстраоральная полировочная паста для диоксида циркония со специально подобранными абразивными свойствами благодаря сверхкрупному алмазному зерну.



· Полировка



· Глянцевая полировка



· Полировальный диск



Оптимальный эффект полировки



Легок в применении, долговечный



Мелкозернистая консистенция



Твердая полировальная паста для зеркальной поверхности

FLNT Blast




Абразивный материал-измельченный корунд

FLNT Blast Абразивный измельченный корунд -это универсальный материал, совместимый с различными зуботехническими материалами, включая цирконий и стекло керамику. Специально разработан для оптимизации качества поверхности и улучшения стоматологических реставраций; играет важную роль в проведении таких процедур, как цементирование и удаление избытка паковочной массы.

- Они состоят из высокочистого оксида алюминия, что обеспечивает профилактику развития силикоза.
- После абразивно-воздушной обработки зубные протезы приобретают идеально обработанную поверхность, что позволяет эффективно увеличить их прочность на сдвиг.
- Частицы имеют правильную острую форму с равномерным распределением их диаметров.
- Шероховатость поверхности зубных реставраций значительно увеличивается после воздушно-абразивной обработки, за счет чего возрастает эффективность процесса.



Упаковка: F320-1 кгF320-5 кг

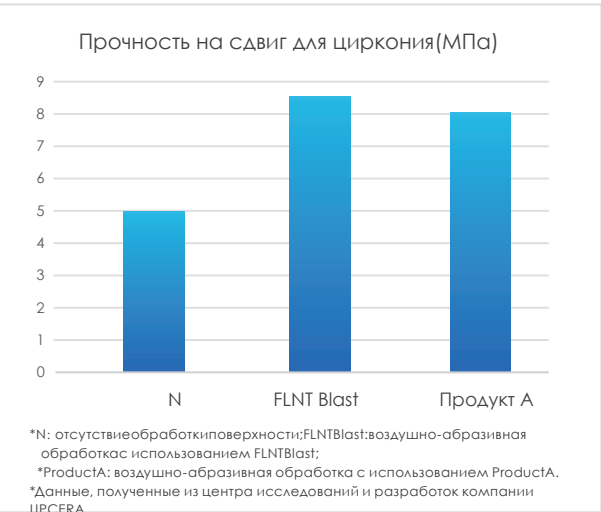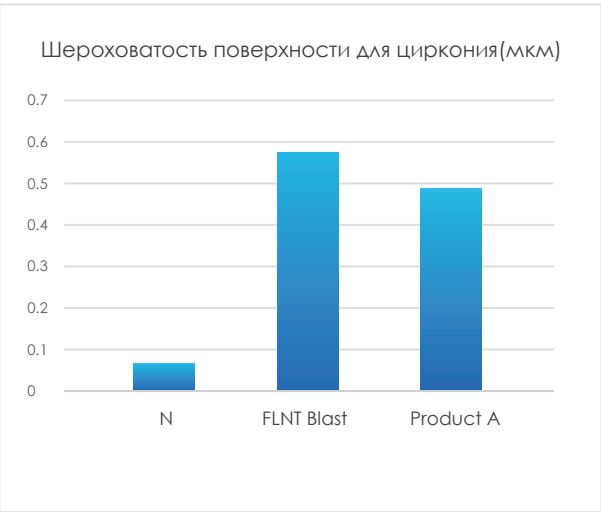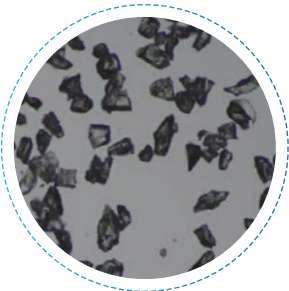

Технические характеристики

Цвет	Ярко белый
Размер частиц	50 мкм
Твердость по Моосу	≥9
Температура плавления	2250°C

Химический состав

Al ₂ O ₃	≥98,5%
Na ₂ O	≤0,5%
Другие оксиды	≤1%

FLNT Pearl

Шарики для синтеризации циркония

FLNTPearl способны выдерживать температуру до 1700°C. Изготовленные из особо чистого циркония, они обеспечивают процесс синтеризации циркониевых протезов без загрязнений.



Однородный размер и качество поверхности

Шарики для синтеризации циркония FLNTPearl обеспечивают более высокую скорость нагрева при использовании лотка для синтеризации. Поскольку лоток для синтеризации и FLNTPearl нагреваются при двух различных скоростях, FLNTPearl поглощают тепло, обеспечивая контролируемую температуру и помогая предотвратить деформацию в процессе синтеризации. Шарики для синтеризации циркония поддерживают коронки, накладки, вкладки, виниры и мостовидные протезы в ходе процесса синтеризации.

Кисть из 100% меха норки

100% мех норки материал с уникальным дизайном



Кисть для глазури #0

Применяется для глазурирования и наружного окрашивания.



Кисть для глазури #1

Применяется для глазурирования и наружного окрашивания.



ОР Кисть #1

Применяется для нанесения ОР (непрозрачного) покрытия.



Кисть для керамики #6

Обеспечивает легкое нанесение прозрачного фарфора, создания эффекта фарфора, а также нанесения фарфора на режущий край.



Кисть для керамики #8

Обеспечивает легкое нанесение дентинного и пришеечного фарфора.



ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

Ведущий мировой поставщик цифровых решений для стоматологии



В лаборатории

Цифровые решения в области стоматологии



В кабинете врача

Цифровые решения в области стоматологии



FLNTScan R1

Интраоральный сканер

- ✓ Калибровка не требуется
- ✓ Спонтанное нагревание и профилактика запотевания
- ✓ Отсоединяемый и фиксированный кабель
- ✓ Стильная и более легкая насадка
- ✓ Автоклавировается до 100 раз




3D естественный цвет

Самая современная технология рендеринга изображений была дополнительно улучшена, что делает воспроизведение цветов более реалистичным и приводит к улучшению эффектов лечения.


Сканирование с использованием технологии ИИ

Встроенная в программное обеспечение функция ИИ не только позволяет автоматически удалять любые артефакты мягких тканей, но и полностью «игнорировать» язык и щеки.

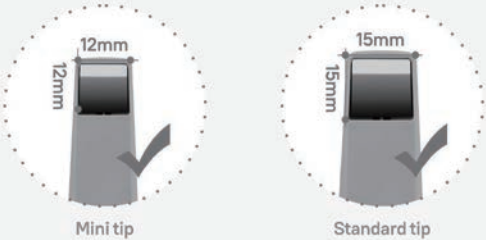

- 3D Открытая система
- Aa Многоязычная система

Уникальные свойства

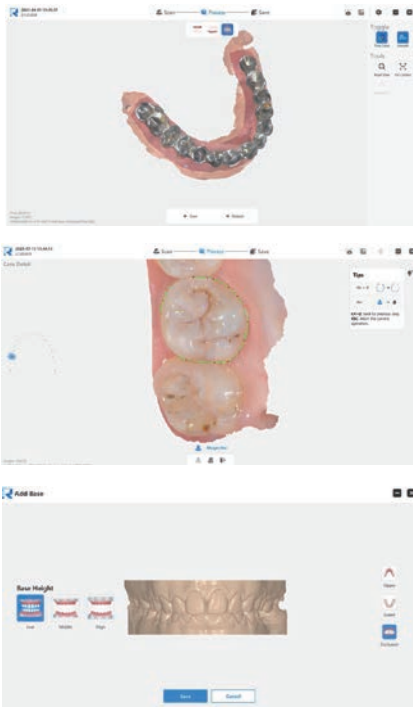

Сканирование металла

Основные решения по оптимизации были внедрены с целью снижения уровня шума и проблем, связанных с отражением при сканировании металлов. Усовершенствованные инструменты для сканирования металлов могут помочь стоматологам при сканировании всех вариантов металлических материалов.

Нанесение конечной линии препарирования

Инструмент Margin Line может помочь стоматологам наносить конечную линию на основании результатов сканирования и экспортировать данные в соответствующий формат. Полученные данные о конечной линии можно импортировать в различные программы для моделирования, такие как EXOCAD.

Конструктор модели

Инструмент «AddBase» помогает стоматологам создавать файлы моделей, которые можно напрямую использовать для печати одним щелчком мыши click.

Спецификации

Насадка	Размер(длинах ширинахвысота)	200 мм X 58 мм X 36 мм
	Масса	210 г
Наконечник	Стандартный размер наконечника	79 мм X 19.7 мм X 15.8 мм
	Минимальный размер наконечника	80 мм X 16 мм X 15 мм
	Область сканирования (стандартная)	15 мм X 15 мм
	Область сканирования(мин.)	12 мм X 12 мм
	Глубина поля сканирования	15 мм
	Автоклавируемый	До 100 автоклавирований 121 C 16 мин Автоклавируемый 134 C 4 мин
Точность	Одинзуб	< 10 мкм
	Полнаядуга	< 20 мкм
Скорость сканирования	Однадуга	30 с
	Полнаядугасокклюзией	90 с
Калибровка		Калибровка не требуется
Выход		STL, OBJ, PLY
Подключение		USB 3.0\Type-C
Многоязычная система		Китайский, английский, французский, испанский, русский, португальский, итальянский, греческий, польский, румынский, японский и корейский

FLNTScan LU1

Многофункциональный дентальный сканер

● **Свободный переключатель**

Достаточно одного нажатия кнопки для перехода к необходимому этапу сканирования без ограничений, связанных с традиционными процессами сканирования.

● **Подходит для множества зубных протезов**

Поддерживает сканирование виниров, слепков, ортодонтических моделей, частично-съемных моделей, несегментированных моделей, имплантов, и др.

● **Открытая система -простая, быстрая и легкая в использовании**

- 1.Позволяет легко экспортировать и импортировать STL файлы .
- 2.Выходной формат: STL, UM, PLY, OBJ.
- 3.Бесшовная интеграция со сторонним программным обеспечением для моделирования , таким как EXO CAD, 3Shape, DentalWings, и др.

● **Сканирование с высоким разрешением**

Двойные камеры с высоким разрешением обеспечивают получение более точных данных о качестве поверхности.

● **Интеллектуальная система высокоскоростного сканирования:**

достаточно одного нажатия кнопки для быстрого и точного перехода другому этапу сканирования, без необходимости находить отверстия и углы сканирования, что повышает эффективность сканирования.



Универсальный экспертный сканер для зуботехнических лабораторий

01 | Используются двойные 3 мега пиксельные камеры с более четкой технологией захвата изображений, усовершенствованным алгоритмом программного обеспечения, что способствует увеличению скорости сканирования и улучшает пост-обработку изображений.

02 | Сканирование на 360° без слепых зон, со сверх большой областью захвата, что позволяет сканировать даже узкие участки ортодонтических моделей, винирах, а также несегментированных моделях, и т.д..

Технические характеристики

Модель	FLNTScan LU1
Размеры	250 x 300 x 539 мм
Масса	16 кг
Видеокамеры	2x3 мега пикселей
Точность	8 мкм
Проектор	Настраиваемый синий свет с поддержкой многоцветного сканирования
Интерфейс	USB 3.0
Выходной формат	STL;PLY;OBJ
Источник питания	AC 100-240V , 50HZ
Число осей	2
Режим текстуры	Окрашивание облака точек
Структура	Открытая
Характеристика	Сканирование несегментированных моделей
Метод сканирования	Бесконтактное сканирование синим светом

UPCERA
Фрезерные
станки



	A51	A52	A52W	A53	B42	B52	C41	D41
Количество осей	5	5	5	5+4	4	5	4	4
Количество фрез	6	6/12	12	12	15	16	5	7
Максимальная мощность	1,0 кВт	1,0 кВт	1,0 кВт	1,5 кВт	4,0 кВт	4,5 кВт	1,5 кВт	5,5 кВт
Максимальная мощность шпинделя	500 В	500 В	500 В	500 В	1800 В	2700 В	500 В	4000 В
Максимальная скорость	80, 000 об/мин	80, 000 об/мин	80, 000 об/мин	80, 000 об/мин	60, 000 об/мин	60, 000 об/мин	80, 000 об/мин	40, 000 об/мин
Системы	серво приводов	серво приводов	серво приводов	серво приводов	серво приводов	серво приводов	Серво приводы смешанного типа	Сервоприводы
Система автоматической смены дисков	—	—	—	✓	—	—	—	—
Большой уголв рращения	А ось : +25°/-18° В ось : ±360°	А ось : ±360° В ось : -35°/+95°	А ось : ±360° В ось : +33°-35°	А ось : -95°/+33° В ось : ±360°	А ось : ±360°	А ось : ±30° В ось : ±360°	А ось : ±360°	В ось : ±360°
Сухое фрезерование	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
Влажное фрезерование	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓
Обработка блока 98,5 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Цирконий	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
ПММА / ПЭЭК / воск	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Стекло керамика / композитная смола	—	—	✓	—	✓	✓	✓	—
Синтеризованный металл	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Кобальт-хром	—	—	—	—	✓	✓	—	✓
Титановый диск	—	—	—	—	✓	✓	—	✓
Предварительная обработка	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓
Коронка / Вкладка / Накладка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мостовидный протез (4единицы)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мостовидный протез (14единиц)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Шины	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Полный съемный зубной протез	—	✓	✓	✓	—	✓	—	—
Каркас	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Абатмент на титановом основании	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Предварительная обработка	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓
Однокомпонентный абатмент	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Структура на штифте / мостовидныйпротез с винтовой фиксацией	—	—	—	—	—	✓	—	—

✓ Yes — No


A51

5-осевой фрезерный станок для сухой обработки

- Высокая стабильность и точность
- Высококлассные механические и электрические детали
- Автоматическая смена инструмента
- Круглосуточная работа без остановки
- Защита от отключения питания и низкого Воздушного давления
- Высоко-производительные конструкции из стали и авиационного алюминиевого сплава



Материалы

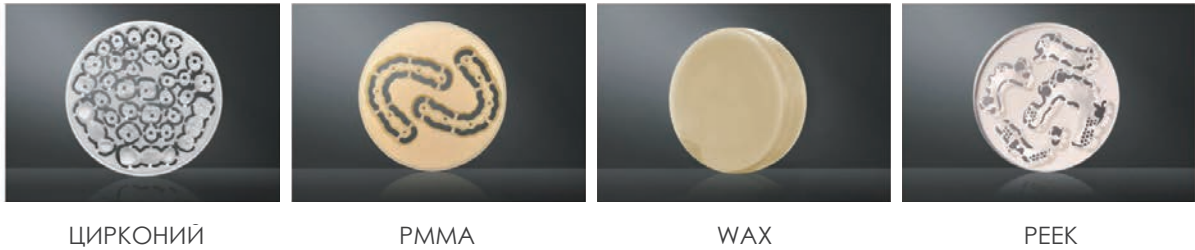

Показания



Характеристики изделия


Спецификации	Характеристики
Размеры	53*47*56 см
Масса	85 кг
Напряжение	220В/50Гц ; 110В/60Гц (опционально)
Мощность	1,0 кВт
Совместимо с системой сжатого воздуха	0,5-0,8 мПа
Скорость шпинделя	80,000 об/мин
Точность	< 0,01 мм
Количество буров	6
Вид охлаждения	Воздушное охлаждение
Угол наклона	А ось: +25° -18°, В ось: ±360°
Применение	Слепочный трансфер, коронка, мостовидный протез, накладка, вкладка, винир, коронка на штифте, телескопическая коронка, индивидуальный абатмент с коронкой, верхние структуры, каркас зубного протеза
Скорость фрезерования	Цирконий, ПЭК, PMMA(10мин/шт), Воск(3мин/шт), Каркас(45мин/шт)

A52

Мощный 5-осевой фрезерный станок для сухой обработки



Вид фиксации (опционально)

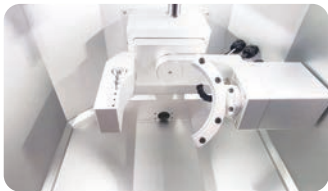

Скорость шпинделя:
80,000 об/мин



Точность: <0,01 мм



90° вертикальное фрезерование

- 5-осевое одновременное фрезерование
- Интегрированная полностью закрытая фрезерная камера для превосходной герметизации и защиты от пыли
- Встроенный ПК с 12-дюймовым сенсорным экран
- Оснащено серво приводом и шпирковым винтом, точность составляет 0,01мм
- Корпус из высокофункционального авиационного сплава алюминия
- Угол до 90° для фрезеровки по боковой поверхности протеза
- Автоматическая смена инструмента и установщик инструмента

Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	55*49*74 см
Масса	110 кг
Напряжение	220В/50Гц ;110В/60Гц(опционально)
Мощность	1,0 кВт
Совместимо с системой сжатого воздуха	0,5-0,8 мПа
Скорость шпинделя	80, 000 об/мин
Угол наклона	А ось: ±360°, В ось: -35°/+95°
Точность	<0,01 мм
Количество буров	6/12
Вид охлаждения	Воздушное охлаждение
Материалы	Цирконий, Воск, PEEK, PMMA (D98,5 мм, толщина 10 мм-30 мм)
Скорость фрезерования	Цирконий, PEEK, PMMA(10мин/шт), Воск(3мин/шт), Каркас(45мин/шт)
Применение	Слепочный трансфер, коронка, мостовидный протез, вкладка, накладка, винир, коронка на штифте, каркас мостовидного протеза, телескопический протез, индивидуальный абатмент с коронкой, протез на импланте


A52W

Мощный 5-осевой фрезерный станок для влажной обработки



- Встроенный резервуар для воды
- Надежный емкостный сенсорный экран, удобный пользовательский интерфейс
- Подходит для работы с 4 единицами предварительно отфрезерованного Ti основания или 5 единиц стекло керамических блоков.
- Стабильный и мощный шпиндель обеспечивает высокую точность получаемых результатов
- Модуль защиты от отключения питания и низкого воздушного давления
- Круглосуточная работа без остановки

Материалы

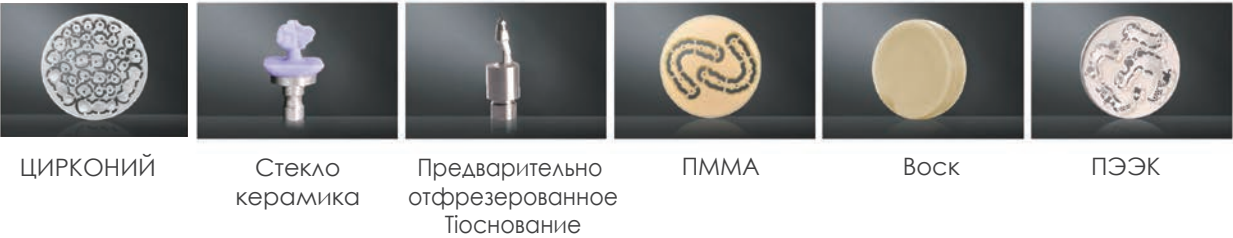


Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	55*49*75 см
Масса	110 кг
Напряжение	220 В/50Гц; 110 В/60Гц(опционально)
Мощность	1,0 кВт
Совместимо с системой сжатого воздуха	0,5-0,8 МПа
Скорость шпинделя	80, 000 об/мин
Угол наклона	А ось: ±360°, В ось: +33° -35°
Точность	<0,01 мм
Количество буров	12
Вид охлаждения	Водное охлаждение (встроенный резервуар для воды)
Материалы	Стеклокерамика, предварительно отфрезерованное Ti основание, ПЭЭК, ПММА, цирконий Воск (D98,5 мм, толщина 10 мм -30 мм)
Скорость фрезерования	Предварительно отфрезерованный абатмент (40 мин/шт), Стеклокерамика (10-30 мин/шт), ПЭЭК, ПММА (10 мин/шт) Воск (3 мин/шт), Каркас (Воск / ПЭЭК, 45/150 мин/шт)
Применение	Слепочный трансфер, коронка, мостовидный протез, вкладка, накладка, винир, коронка на штифте, каркас мостовидного протеза, телескопический протез, индивидуальный абатмент с коронкой, протез на импланте

A53

5-осевой фрезерный станок с системой смены дисков

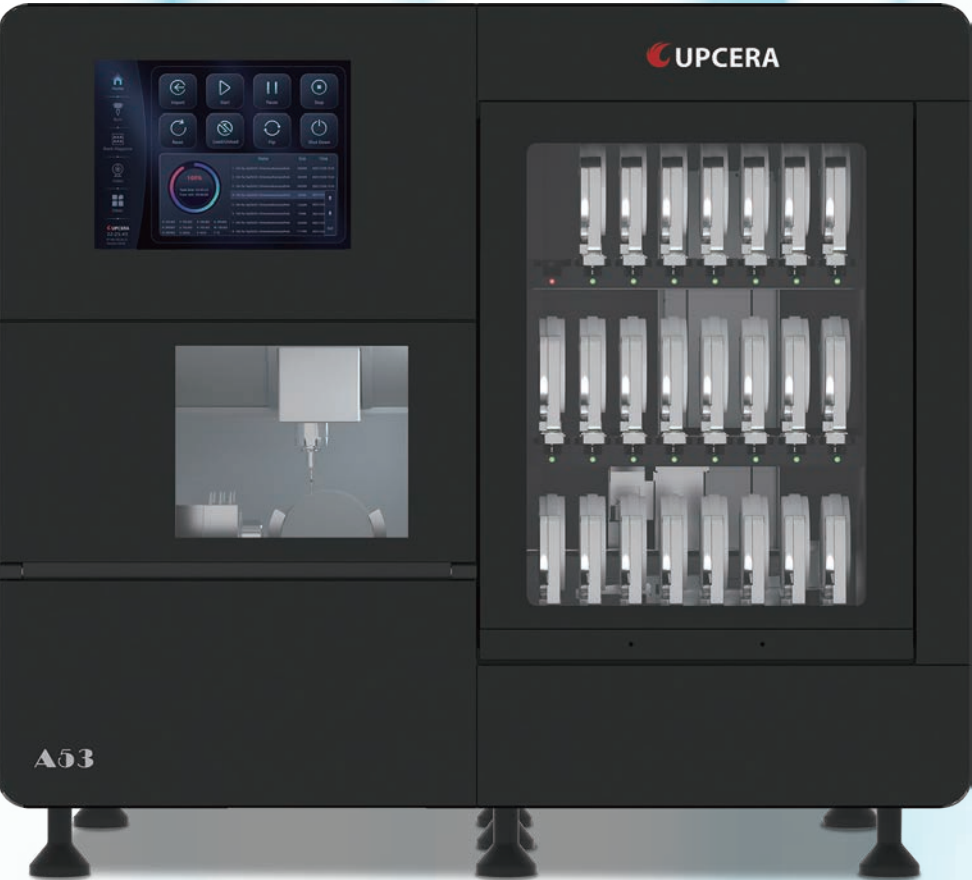

12 позиционная система автоматической смены инструмента



Возможность смены дисков: 24 диска



240° Многофункциональный держатель дисков

- Технология Интернета вещей (IoT)
- 12-дюймовый сенсорный экран
- Выдающаяся стабильность и высокая точность
- Высококачественный шпиндель с автоматической сменой инструмента
- Мониторинг в режиме реального времени
- Корпус из высокофункционального авиационного сплава алюминия
- Защита от низкого воздушного давления
- Круглосуточная работа без остановки

Материалы



ЦИРКОНИЙ ПММА WAX ПЭЭК

Характеристики изделия


Спецификации	Характеристики
Размеры	100*70*85 cm
Масса	270 кг
Напряжение	220В/50Гц; 110В/60Гц (опционально)
Мощность	1,5кВт
Совместимо с системой сжатого воздуха	0,55-0,8 мПа
Скорость шпинделя	80, 000 об/мин
Угол наклона	А ось: +33° / -95°, В ось: ±360°
Точность	<0,01 мм
Количество буров	12
Резервуар для заготовок	8/24 (опционально)
Вид охлаждения	Воздушное охлаждение
Материалы	Цирконий, Воск, ПЭЭК, ПММА (D98,5 мм, толщина 10 мм -30 мм)
Скорость фрезерования	Цирконий ПЭЭК, ПММА (10 мин/шт), Воск (3 мин/шт), Каркас (Воск, 45 мин/шт)
Применение	Слепочный трансфер, коронка, мостовидный протез, вкладка, накладка, винир, коронка на штифте, каркас мостовидного протеза, телескопический протез, индивидуальный абатмент коронкой, протез на импланте

B42

Фрезерный станок для предварительной обработки абатментов

- 12-дюймовый сенсорный экран
- Высочайшая стабильность и высокая точность
- Шпиндель с выдающимися характеристиками
- Круглосуточная работа без остановок
- Прост в использовании
- Высококлассные компоненты
- Цельнолитая стальная конструкция
- Защита от низкого воздушного давления

Материалы

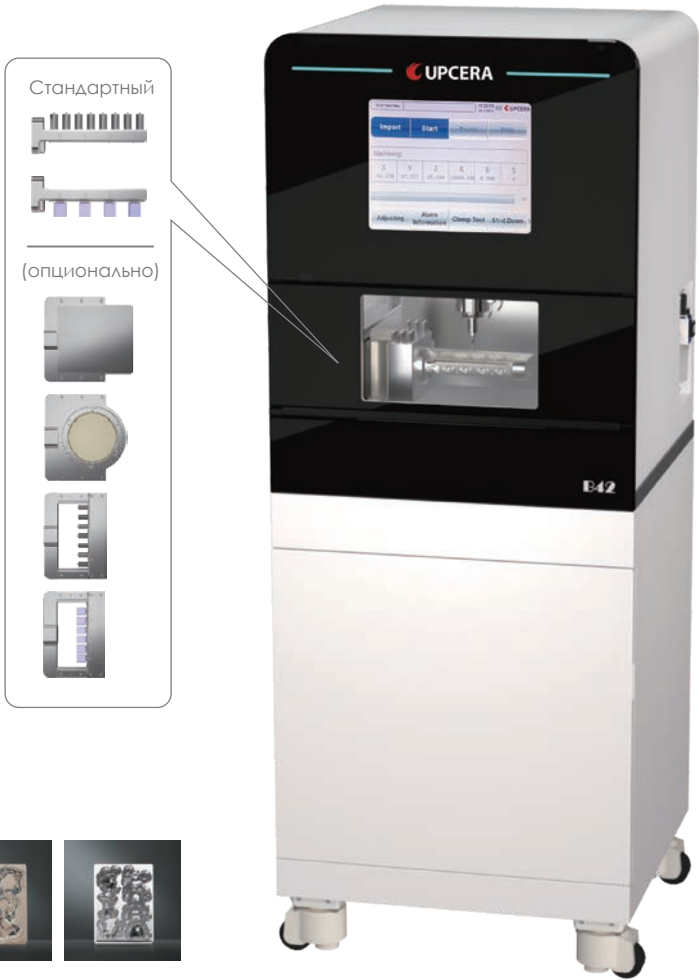

Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	65*65*175 см
Масса	409 кг
Напряжение	220В/50Гц 110В/60Гц(опционально)
Мощность	4,0 кВт
сжатого воздуха Совместимо с системой	0,5-0,8 мПа
Скорость шпинделя	60,000 об/мин
Точность	<0,01 мм
Угол наклона	А ось: ±360°


Спецификации	Характеристики
Количество буров	15
Вид охлаждения	Водное охлаждение
Материалы	Предварительно отфрезерованное титановое основание Стеклокерамика/Титановый диск, ПММА, ПЭЭК(опционально)
Применение	Индивидуальный абатмент, коронка, вкладка, накладка, винир / каркас зубного протеза (опционально)
Скорость фрезеровки	Предварительно отфрезерованный абатмент (15 мин/ед) Стекло керамика (10-30 мин/ед) Металлическая коронка (25 мин/ед) Каркас (Воск/ПЭЭК/титан, 45/120/180 мин/шт)

B52

Фрезерный станок для обработки мостовидного протеза винтовой фиксацией

- 12-дюймовый сенсорный экран удобный пользовательский интерфейс
- Высокая стабильность, высокая точность
- Прост в использовании, круглосуточная непрерывная работа
- Цельнолитая стальная конструкция обеспечивает высочайший уровень стабильности
- Высокофункциональный шпиндель с системой автоматической смены инструмента
- Высококлассные механические и электрические детали, модуль защиты от отключения питания и низкого воздушного давления

Материалы

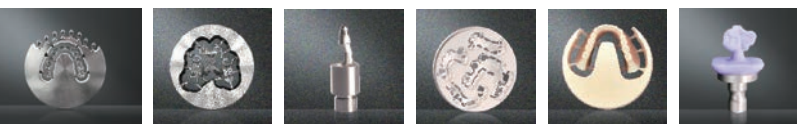

Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	65*65*175 см
Масса	430 кг
Напряжение	220В/50Гц 110В/60Гц(опционально)
Мощность	4,5 кВт
сжатого воздуха Совместимо с системой	0,55-0,8 мПа
Скорость шпинделя	60,000 об/мин
Точность	< 0,01 mm
Угол наклона	А ось is ±30°, В ось is ±360°

Спецификации	Характеристики
Количество буров	16
Вид охлаждения	Водное охлаждение
Материалы	Титановый диск, кобальт-хром, Предварительно отфрезерованное титановое основание ПММА, Воск/Стеклокерамика(опционально)
Применение	индивидуальный абатмент, моавидный протез на имплантах, стержень импланта, индивидуальный абатмент, слепочный трансфер, коронка, мостовидный протез/вкладка, винир(опционально)
Скорость фрезеровки	Индивидуальный абатмент(40 мин/ед) Предварительно отфрезерованный абатмент(15 мин/ед) Стекло керамика (10-30 мин/ед) ПММА (10 мин/ед), Воск (3 мин/ед) Титановый каркас(180 мин/ед)




C41

4-осевой фрезерный станок для влажной обработки

- Компактная и эргономичная конструкция
- Встроенная автоматическая система циркуляции воды
- Быстрое и точное производство с дополнительной эффективностью
- Универсальное применение вплоть до 40 мм блока
- Идеально как для лабораторий, так и для проведения прямых реставраций в день обращения

Материалы

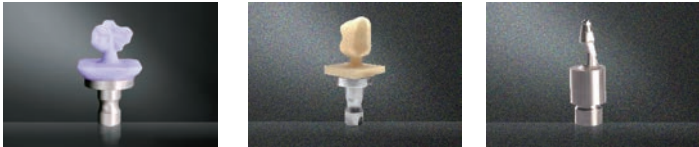

Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	45*35*42 см
Масса	45 кг
Напряжение	220В/50Гц; 110В/60Гц (опционально)
Мощность	1 кВт
Совместимо с системой сжатого воздуха	0,42-0,8 МПа
Скорость шпинделя	80,000 об/мин
Точность	< 0,01 мм
Количество буров	5
Вид охлаждения	Водное охлаждение
Угол наклона	A ось: ±360°
Материалы	Стекло керамика, блок из композитной смолы/титановый блок (опционально)
Применение	Винир, полно контурная коронка, вкладка, накладка, предварительно отфрезерованный абатмент
Скорость фрезерования	ПММА (12 мин/шт), стеклокерамика (10~30 мин/шт) предварительно отфрезерованный абатмент (40 мин/шт)



D41

Фрезерный станок для титановых каркасов зубных протезов

- 15-дюймовый сенсорный экран
- Автоматическая смена инструмента
- очная 4-осевая обработка
- Специально разработанный фрезеровочный бор для обработки поднутрений
- Цельнолитая стальная конструкция обеспечивает максимальную стабильность
- Высококлассные механические и электрические детали
- Защита от низкого воздушного давления



Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	120*100*180 см
Масса	1000 кг
Напряжение	220 В 50 Гц; 380 В 50 Гц (опционально)
Мощность	5,5 кВт
Совместимо с системой сжатого воздуха	0,55-0,8 МПа
Скорость шпинделя	40,000 об/мин
Точность	<0,01 мм
Количество буров	7
Вид охлаждения	Водное охлаждение
Угол наклона	B ось: ±360°
Материалы	Титановый диск или блок, кобальт-хром, композитная смола, титановый блок (опционально)
Применение	Каркас зубного протеза, металлическая коронка, индивидуальный абатмент (опционально)
Скорость фрезерования	Титановый каркас (150 мин/большой размер/шт), ПММА (10 мин/шт), Титановая коронка (25 мин/шт), предварительно отфрезерованный абатмент (15 мин/шт)

GT1

Печь для синтеризации циркония



- GT1 это новая разновидность высокоскоростной печи для синтеризации с нагревательным элементом из карбида кремния(SiC), позволяющая предотвратить загрязнение циркония.
- ЖК-дисплей обеспечивает контроль напряжения, тока и температуры печи в режиме реального времени с высокой эффективностью и стабильностью.
- Температура обжига до 1550°C. 18 встроенных программ синтеризации имеют 5 этапов, что позволяет удовлетворять различные потребности в синтеризации циркония с использованием различных кривых.

Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	420*46,50*800 мм
Масса нетто	44 кг
Номинальное напряжение	220V ± 10%
Номинальная мощность	2500 Вт
Номинальная частота	50 Гц
Максимальная рабочая температура	1550 °C
Уровень защиты	IP21
Быстрое плавление	~500В 32А
Плавление	①: 2×~380В 16А ②: ~250В 0,5А ③: 250В 1А
Скорость нагрева	2-30 °C



C1

Высокоскоростная печь для синтеризации

- Два режима
Нормальная синтеризация & Высокоскоростная синтеризация
- Высокая эффективность
- Великолепные результаты после синтеризации

45 мин

Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Номинальное напряжение	220±10%
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Максимальная мощность	2000 Вт
Уровень защиты	IP21
Размеры	325*585*745 мм
Скорость нагрева	2-15 °C

Спецификации	Характеристики
Защитная трубка1	2×~380 В16А
Защитная трубка2	~250В 0,5А
Защитная трубка2	250 В 1А
Скорость защитная трубка	~500В 32А
Масса нетто	70 кг
Максимальная температура	1600°C
Количество кривых	10



A7+

Печь для обжига керамики

- Двухслойная металлическая защита камеры
- Интегрированная вакуумная технология
- Автоматический режим подъема платформы
- Встроенная система предупреждения об ошибках
- Двух-этапная программа, восполняющая особые потребности в синтеризации
- Компенсация температуры
- Вакуумная проверка, очистка, сушка, атакжедругие процедуры технического обслуживания
- Уникальное, равномерное распределение тепла

Характеристики изделия

Спецификации	Характеристики
Размеры	330*420*560 мм
Масса	32,5kg
Напряжение	220В±10% / 50Гц
Уровень влагозащиты	IPX1
Предохранитель 1	3,0А
Предохранитель 2	8,0А
Скорость нагревания	5~100℃
Максимальная рабочая температура	1200℃
Постоянная температура	Время 00:30-30:00 мин
Существующие размеры камер	φ85×55 (мм)
Высокий вакуум	< 35 мм рт.ст.

FLNTSaug-R-407-1 / FLNTSaug-R-412

Вакуумный пылесос для циркония



- Компактная и портативная конструкция с мощным аспиратором вплоть до 24 м/с
- Бесщеточный мотор с плавной регулировкой скорости, позволяет добиться высокого качества и более 20000 часов работы
- Работа в условиях ультра-тишины, уровень шума ниже 65 дБ
- Высокая эффективность, может фильтровать 8 мкм частицы, простое техобслуживание, легкая очистка

Характеристики изделия

Модель	FLNTSaug-R-407-1
Размеры (см)	460×430×665 мм
Масса	32 кг
Номинальное напряжение	220V±10%
Номинальная сила тока	AC 5,5A (MAX)
Мощность	1100 Вт (макс)
Номинальная частота	50 Гц
Отрицательное давление	9,6 кПа (Ø50 мм)
Скорость потока воздуха	4,82 м³/мин(Ø50mm)
Шум дБ	< 65 дБ
Количество подключений	2

Модель	FLNTSaug-R-412
Размеры (см)	470×430×600 мм
Масса	32 кг
Номинальное напряжение	220V±10%
Номинальная сила тока	AC 0,7 А
Мощность	150Вт
Номинальная частота	50Гц
Отрицательное давление	4,2кПа (Ø50 мм)
Скорость потока воздуха	3,17 м³/мин(Ø50 мм)
Шум дБ	< 62 дБ
Количество подключений	1

СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ



MDR



FDA




GOST



Health Canada



ISO13485

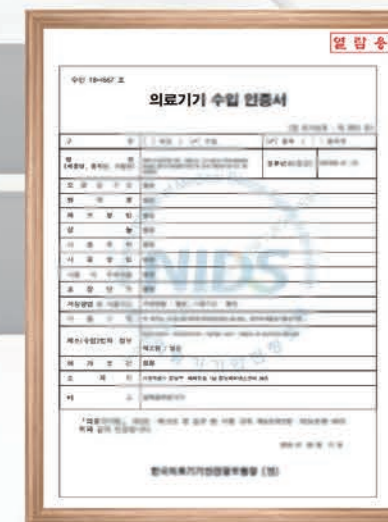

KFDA